


**waterpik®**

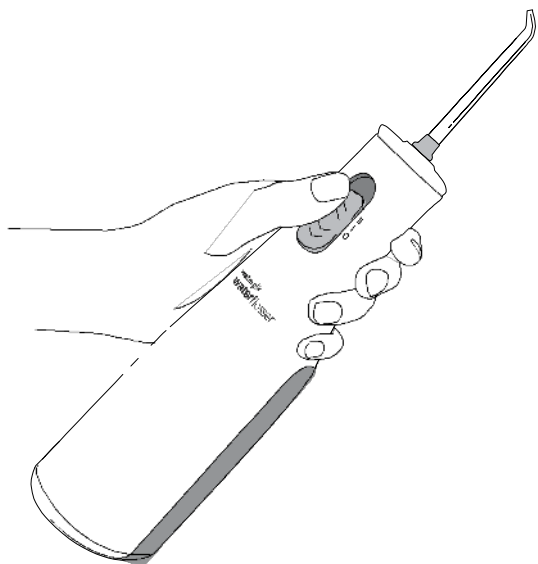

**Waterpik® irrigaator suu ja  
hammaste puhastamiseks  
Mudel WF-02**

.....

[www.waterpik.lt](http://www.waterpik.lt)

Tähtsad ohutusnõuded	3
Toote kirjeldus	5
Millest alustada?	7
Teie Waterpik® hammaste ja hambavahede puhastamine surveveega ja rikete kõrvaldamine	8
Piiratud garantii üheks aastaks	9

## TÄHTSAD OHUTUSNÕUDED

### OLULISED OHUTUSNÕUDED

Elektriseadmete kasutamisel, eriti kui läheduses viibivad lapsed, tuleb alati järgida peamisi ohutusnõudeid, kaasa arvatud:

**ENNE KASUTAMIST LUGEGE LÄBI KASUTUSJUHEND.**

### HOIATUS:

**Vigastuste vältimiseks:**


- Ärge suunake veejuga keele alla, kõrva, ninasse või muudesse tundlikesse kohtadesse. See toode võib tekitada sellist survet, mis võib neid kohti tõsiselt vigastada.
- Ärge suunake veejuga ninasse või kõrva. Kraanivees või kloreerimata kaevuvees võivad olla eluohtlikud amööbid *Naegleria fowleri*, mis ninasse või kõrva sattumisel võivad põhjustada inimese surma.
- Kasutage seda toodet ainult nii, nagu on kirjeldatud selles kasutusjuhendis või nagu on soovitanud teie suuhügienist.
- Ärge pange sellesse seadmesse laetavaid või vahetatavaid liitiumpatareisid. Seda tüüpi patareid võivad tekitada sellist survet, mis põhjustab tarbijale ebamugavust ning võib olla seadme rikke põhjuseks. Liitiumpatareide kasutamise korral seadme garantii ei kehti.

- Kasutage ainult WaterPik, Inc. soovitatud otsikuid ja lisasid.
- Ärge loopige seadet ega toppige mingeid kõrvalisi esemeid seadme avaustesse.
- Ärge kasutage seadet õues ega seal, kus kasutatakse pihustatavaid aerosooltooteid või kus toimub hapnikuga varustamine.
- Ärge kasutage selles seadmes joodi, valgendit või mittelahustuvaid kontsentreeritud eeterlikke õlisid. Nende kasutamine võib halvendada seadme toimimist ja lühendada kasutusaega.
- Reservuaari valage vett või suuhügienisti soovitatud muid vedelikke.
- Enne selle seadme kasutamist eemaldage suust kõik ehted.
- Ärge kasutage, kui keelel või suus on haavandeid.
- Kui hambaarst soovitas teile enne hambahoolduse protseduure antibiootikumiravi, siis peate enne selle või mõne teise suuõõne hügieeniseadme kasutamist pidama nõu oma suuhügienistiga.


- Range järelevalve on vajalik, kui seadet kasutavad lapsed või puudega isikud või kui need isikud viibivad läheduses siis, kui seadet kasutab teine isik.
- Jälgige, et lapsed ei mängiks selle seadmega.





**HOIDKE SEE KASUTUSJUHEND ALLES, ET SAAKSITE SEDA VAJADUSEL UUESTI LUGEDA**

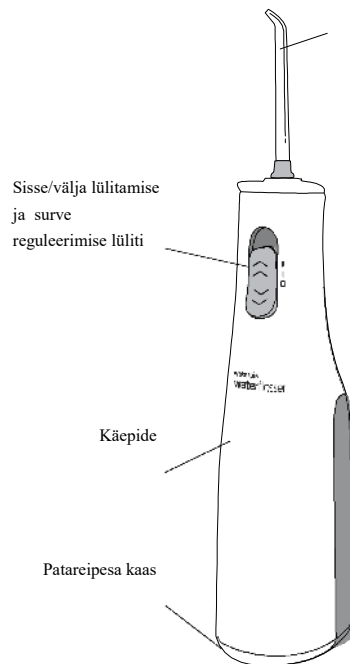
## TOOTE KIRJELDUS

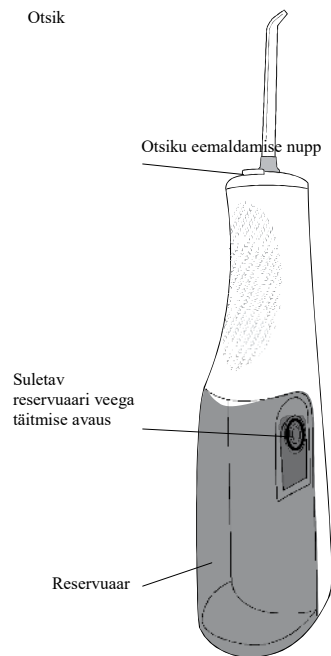

Otsik

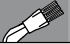

Vahetada iga 3 kuu järel	
Ortodontiline otsik	SOBIVAIM
	<input checked="" type="checkbox"/> Breketid <input checked="" type="checkbox"/> Üldkasutus
„Pik Pocket™“ otsik	SOBIVAIM
	<input checked="" type="checkbox"/> Periodont. taskutele <input checked="" type="checkbox"/> Hargnemistele
Plaque Seeker® otsik	SOBIVAIM
	<input checked="" type="checkbox"/> Implantaadid <input checked="" type="checkbox"/> Hambaplaadid <input checked="" type="checkbox"/> Hambakroonid <input checked="" type="checkbox"/> Üldkasutus Sillad
Toothbrush Tip	SOBIVAIM
	<input checked="" type="checkbox"/> Üldkasutus




Vahetada iga 6 kuu järel	
Klassikaline pihustusotsik	SOBIVAIM
	<input checked="" type="checkbox"/> Üldkasutus
Keelepuhastaja SOBIVAIM	
	<input checked="" type="checkbox"/> Suuõõne värskendamiseks

**MÄRKUS:** Koiki neid otsikuid ei ole kõikide mudelite komplektides.

Vahetatavaid otsikuid / lisasid saab osta internetikauplusest [www.waterpik.lt](http://www.waterpik.lt) või tellida telefonil +37062026601. Põhjalikumat teavet otsikute, muude lisade ja seadme kasutamise kohta võite leida meie kodulehelt: [www.waterpik.lt](http://www.waterpik.lt)

## MILLEST ALUSTADA?


### 1 Patareide sisse panemine

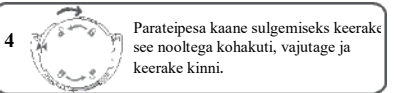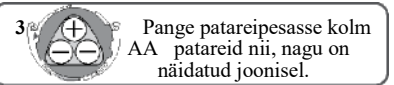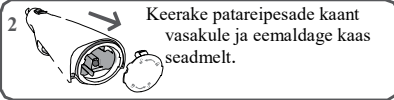

Seadmesse tuleb panna uued patareid, kui märkate, et veesurve on vähenenud.

### Reservuaari täitmine

Tõstke üles reservuaari kaas ja täitke reservuaar leige veega.

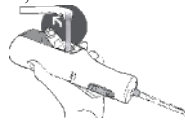

### Otsikute kinnitamine ja eemaldamine

Asetage otsik selleks ette nähtud kohta irrigaatori käepideme keskel.

Otsiku käepidemelt eemaldamiseks vajutage otsiku eemaldamise nuppu ja võtke otsik käepidemelt.

### Pärast kasutamist

Lülitage seade välja. Valage reservuaarist välja ülejäänud vesi. Vajadusel saate reservuaari käepidemelt eemaldada, lükates reservuaari alla seadme aluse poole.


Kui soovite reservuaari tagasi seadme käepidemele paigaldada, lükake seda lihtsalt ülesse seadme ülemise osa poole.

### Surve reguleerimine

Veesurvet saate reguleerida väga lihtsalt, liigutades käepidemel asuvat survelülitit üles-alla.

#### Surve reguleerimine

Kui lükkate lüliti ühe sammu võrra üles, on surve nõrk (I), keskmine 2 (II), tugev surve. -

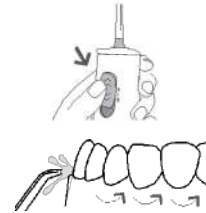

### Soovitatav puhastusviis

Parima tulemuse saavutamiseks alustage hammaste puhastamist tagumistest hammastest ja liikuge esihammaste poole.

Liigutage otsikut õrnalt igemete piiril, peatudes hetkeks iga hambavahe juures. Jätkake, kuni olete ära puhastanud kõik hambavahed nii seest- kui väljastpoolt. Suunake veejuga igemetele 90-kraadise nurga all. Avage suu ja laske suhu kogunenud veel valamusse joosta. Parima tulemuse saavutate, kui hoiate seadme otsikut hammastega risti.

## TEIE WATERPIK® HAMMASTE JA HAMBVAHEDE PUHASTAMINE SURVEVEEGA JA RIKETE KÕRVALDAMINE

### OTSIKU KASUTAMINE

#### Pik Pocket™ otsik

Pik Pocket™ otsik on ette nähtud spetsiaalselt veel või bakterivastase lahuse pihustamiseks sügavale igemetaskutesse.

Pik Pocket® otsiku kasutamiseks valige seadmel kõige madalam surve. Asetage pehme otsik hambale 45-kraadise nurga all ja suruge otsik õrnalt igemete alla igemetaskusse. Lülitage seade sisse ja jätkake sama tegevust kogu igemepeiril.

#### Keele puhastamise otsik

Keele puhastusotsiku kasutamiseks, valige seadmel kõige madalam surve, hoidke otsikut keele keskel võimalikult taga. Lülitage seade sisse ja liikuge kaabitsotsikuga kergelt keele pinnal tagant ette surudes keeleotsa poole.

Suurendage survet vastavalt oma vajadustele.

#### Ortodontiline otsik

Ortodontilise otsiku kasutamiseks liigutage otsikut õrnalt igemepeiril,

peatudes hetkeks iga hamba juures, et puhastada hammaste ja ortodontiliste klambrite ümbrus.

Jätkake tegevust iga hamba juures.

#### Hambaharja otsik

Hambaharjaotsikut võib kasutada kas hambapastaga või ilma.



Lülitage seade sisse nii, et vesi hakkaks voolama läbi otsiku.

Valige madal surve (hambaharja harjased ei tohi painduda), puhastage hambad lühikeste liigutustega ette-taha nii, nagu peseksite hambaid tavalise hambaharjaga.

#### Plaque Seeker® otsik

Plaque Seeker® otsiku kasutamiseks hoidke seda hammaste lähedal nii, et hambaharja harjased puutuks õrnalt vastu hambaid.

Liigutage otsikut õrnalt igemepeiril, peatudes hetkeks hambavahede kohal, et saaksite õrnalt puhastada hambavahed ja lasta veel voolata läbi hammaste vahede.

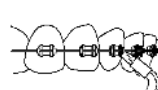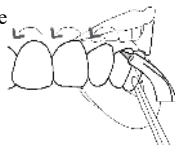

kasutanud mingit spetsiaalset vedelikku, peske seade pärast hoolikalt puhtaks, et vältida seadme ummistumist. Täitke reservuaar osaliselt sooja veega, lülitage seade sisse, suunake otsik valamusse ja laske töötada, kuni reservuaar on tühi.



#### Puhastamine

Mitte kunagi ärge kastke seadet vette. Vajadusel kasutage seadme puhastamiseks pehmet lappi ja õrnatoimelist puhastusvahendit. Veereservuaari eemaldamine on väga lihtne ja puhastamine kerge. Reservuaari võib ohutult pesta ka nõudepesumasina ülemises sahtlis. Soovitame reservuaar eemaldada ja puhastada üks kord nädalas.

#### Katlakivi eemaldamine

Sõltuvalt vee karedusest võib seadmes tekkida katlakivi. Kui te ei hoolda seadet, võib katlakivi seadme tööd häirida. Sisemiste osade puhastamine: täitke reservuaar sooja veega, lisage 2 supilusikatäit söögijäädikat.



## PIIRATUD GARANTII ÜHEKS AASTAKS

Suunake käepide ja otsik valamusse. Lülitage seade sisse ja laske töötada seni, kuni reservuaar on tühi. Seadme loputamiseks korrake seda protseduuri, kuid seekord täitke reservuaar ainult sooja veega.

Oma irrigaatori optimaalse toimimise tagamiseks, korrake seda protseduuri kord 1–3 kuu jooksul.

### AA patareide paigaldamine ja käitlemine

- Sellele seadmele sobivad leeliselised ning NiMH laetavad patareid.
- Patareid tuleb paigaldada vastavalt õigele polaarsusele.
- Kasutatud patareid tuleb irrigaatorist välja võtta ja käidelda reeglite järgi.
- Toitepatareid peavad olema kaitstud lühise eest.
- Patareide põletamine ei ole lubatud, neid tuleb käidelda reeglite järgi.
- Kasutatavate AA patareide tüüp ja kvaliteet võivad avaldada mõju seadme tööle.
- Kõik patareid vahetage välja korraga. Paigutage seadmesse uued sama tüüpi ja liiki patareid.
- Patareid vahetage uute vastu siis, kui märkate seadme töös häireid.
- Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul, võtke patareid seadmest välja.

**HOIATUS:** Liitiumpatareide kasutamine võib seadet rikkuda ja sel juhul garantii ei kehti.



### Teenindus

Waterpik® irrigaator ei vaja regulaarset tehnilist hooldust. Seadme kõik osad ja lisad leiate internetist aadressil [www.waterpik.lt](http://www.waterpik.lt)

Samuti võite meile helistada telefonil +37062026601. Kui vajate abi, nimetage alati seadme seeria ja mudeli numbrid. Need numbrid on märgitud seadme põhjale. Kas teil on veel küsimusi? Külastage meie kodulehte [www.waterpik.lt](http://www.waterpik.lt) WaterPik, Inc. garanteerib selle seadme uutele kasutajatele, et kõik materjalid on defektideta, ning vastutab toote kvaliteedi eest soetamise päevast kahe aasta jooksul.

Garantiiteeninduse korral palume, et ostja esitaks ostukuupäeva tõendamiseks seadme täidetud ja pitseriga kinnitatud garantiiraamatu originaali ning vajadusel ka seadme, et saaksime veenduda garantiiteeninduse vajaduses. WaterPik, Inc. vahetab omal äranägemisel välja seadme iga detaili, mis ettevõtte arvates on rikki läinud, tingimusel, et seadet ei ole kuritarvitatud, et seda kasutati otstarbekohaselt, seda ei ole pärast soetamist muudetud ega rikutud, seadet on kasutatud vastavalt kasutusjuhendile ning ainult WaterPik, Inc. kinnitatud originaalsete ja -detailidega. Ostja vastutab selle seadme kasutamise eest ja sellele protsessile garantiid ei rakendata. See piiratud garantii ei hõlma lisasid ega kasutatavaid detaile, näiteks otsikud, patareid jms.

See garantii tagab teile konkreetsed juriidilised õigused. Teil võivad olla ka muud õigused, mis on seotud teie elukohas kehtivate seadustega.

