


waterpik®

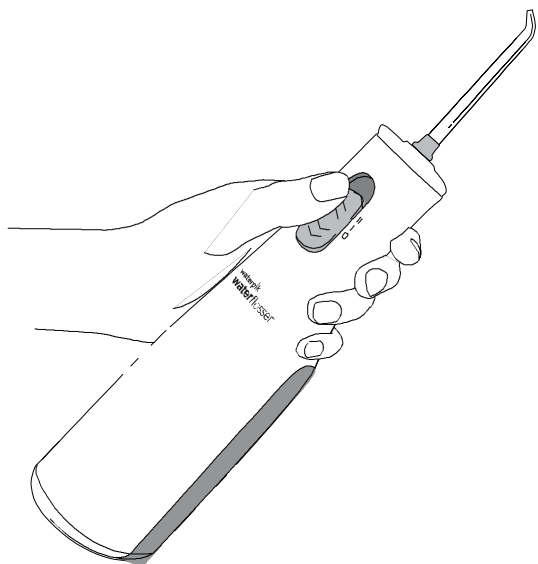

Waterpik® burnos irigatorius
Modelis WF-02

.....
www.waterpik.lt

Svarbios atsargumo priemonės	3
Gaminio aprašymas	5
Nuo ko pradėti	7
Jūsų Waterpik® tarpdančių valiklio vandenį srove plovimas ir trikčių šalinimas	8
Ribota vienerių metų garantija	9

SVARBIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS

Naudojant elektros prietaisus, ypač vaikams esant šalia, visada reikėtų imtis pagrindinių saugumo priemonių, įskaitant:

PRIEŠ NAUDOJIMĄ PERSKAITYTI VISAS INSTRUKCIJAS.

ĮPĖJIMAS:


Siekiant sumažinti pavojų susižeisti:

- Nenukreipkite vandens po liežuviu, į ausį, nosį ar kitas jautrias vietas. Šis gaminys geba sudaryti tokius slėgius, kurie gali rimtai pažeisti šias sritis.
- Nenukreipkite vandens į nosį ar ausį. Vandenyje iš čiaupo ar nechloruotame šulinio vandenyje gali būti pavojingų gyvybei amebų *Naegleria fowleri*, kurios, patekusios į šias sritis, gali būti mirtinos.
- Šį gaminį naudokite tik taip, kaip nurodyta šiose instrukcijose, arba kaip rekomenduoja jūsų dantų priežiūros specialistas.
- Į šį gaminį nedėkite įkraunamų arba keičiamų ličio baterijų. Tokio tipo baterijos gali sukelti slėgius, kurie vartotojui sudarys nepatogumų, be to, jos gali padaryti žalą prietaisui. Naudojant ličio baterijas garantija negalios.

- Naudokite tik Water Pik, Inc. rekomenduojamus antgalius ir priedus.
- Nemeskite ir nekiškite jokių svetimkūnių į jokią gaminio angą.
- Nenaudokite šio gaminio lauke ir nesinaudokite juo ten, kur naudojami aerosoliniai (purškiami) gaminiai arba kur tiekiamas deguonis.
- Su šiuo gaminiu nenaudokite jodo, baliklio ar vandenyje netirpių koncentruotų eterinių aliejų. Jų naudojimas gali pabloginti gaminio veikimą ir sutrumpinti gaminio naudojimo laiką.
- Rezervuarą pildykite tik vandeniu ar kitu dantų priežiūros specialisto rekomenduojamu tirpalu.
- Prieš naudodami šį gaminį, pašalinkite burnos papuošalus.
- Nenaudokite, jei ant liežuvio ar burnoje yra atvirų žaizdų.
- Jei jūsų gydytojas jums rekomendavo parengtinį gydymą antibiotikais prieš dantų priežiūros procedūras, prieš naudodami šį prietaisą ar bet kokią kitą burnos higienos priemonę, turėtumėte pasikonsultuoti su savo odontologu.

- Būtina griežta priežiūra, jeigu prietaisu naudojasi vaikai ar neįgalieji, ar jiems esant šalia prietaisu naudojasi kitas asmuo.
- Būtina prižiūrėti ir užtikrinti, kad vaikai nežaistų su prietaisu.


IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

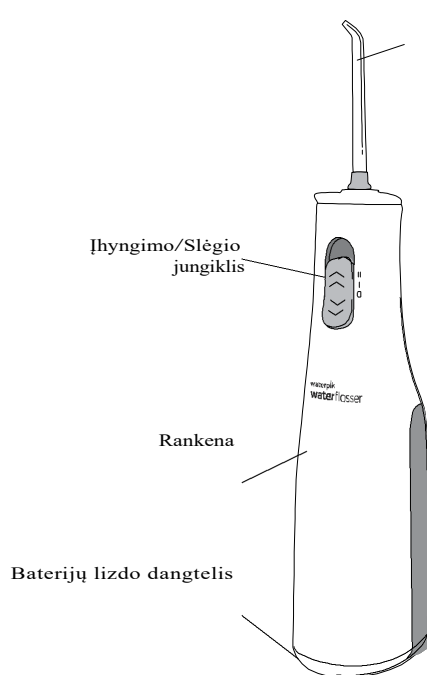







Antgalis

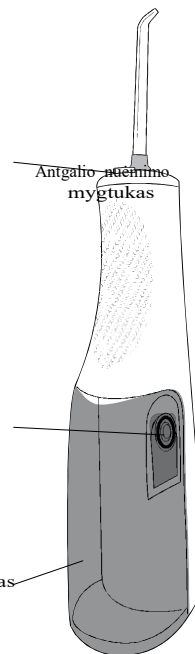Uždaroma vandens įpylimo anga

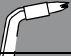Rezervuaras



Keisti kas 3 mėnesius	
Ortodontinis antgalis 	TINKAMIAUSIAS <input checked="" type="checkbox"/> Breketams <input checked="" type="checkbox"/> Bendram naudoj.
„Pik Pocket™“ antgalis 	TINKAMIAUSIAS <input checked="" type="checkbox"/> Periodontin. kišenėms Iššikojimams
„Plaque Seeker®“ antg. antgalis 	TINKAMIAUSIAS Implantams Dantų plokšt. Karūnelėms Bendram naud. Tiltams <input checked="" type="checkbox"/> Bridges <input checked="" type="checkbox"/>
Dantų šepetuko antgalis 	TINKA <input checked="" type="checkbox"/> Bendram naudojimui

Keisti kas 6 mėnesius	
Klasikinis purkštuko antgalis 	TINKA <input checked="" type="checkbox"/> Bendram Lidžuvių valiklis TINKA
	<input checked="" type="checkbox"/> Gaivesniam kvapui

PASTABA: Ne visi antgaliai yra visuose modeliuose.

Keičiamus antgalius / priedus galima įsigyti internetinėje parduotuvėje www.waterpik.lt arba telefonu +37062026601. Išsamesnės informacijos apie antgalius, kitus priedus ir gaminio naudojimą ieškokite mūsų tinklalapyje: www.waterpik.lt

1 Baterijų įdėjimas




1 Nuimkite vandens rezervuarą.



2 Iš uždarymo pozicijos pasukite baterijų lizdo dangtelį į kairę, taip atidarysite dangtelį, tada nuimkite jį nuo prietaiso.



3 Įdėkite 3 AA baterijas taip, kaip parodyta paveikslėlyje

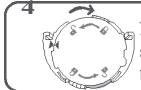

4 Norint uždaryti elementų dangtelį sulygininkite jį su lyg rodyklėmis paspauskite ir pasukite.

Baterijas keiskite tada, kai pastebite sumažėjusi slėgi.

Rezervuaro pripildymas

Pakelkite rezervuaro dangtelį ir pripilkite drungo vandens.

Antgalių uždėjimas ir nuėmimas

Antgalį uždėkite į jam skirtą vietą, esančią irigatoriaus rankenos centre.

Norėdami nuimti antgalį nuo rankenos, paspauskite antgalio nuėmimo mygtuką ir nuimkite antgalį nuo rankenos.

Švelniai slinkite antgalį palei dantenu liniją trumpam sustodami ties tarpdančiais. Tęskite tol, kol išvalysite tarpdančius tiek iš išorės, tiek tiek iš vidaus. Nukreipkite purkštuko srovę į dantenas 90 laipsnių kampu.. Šiek tiek praverkite lūpą ir leiskite vandeniui išbėgti į kriauklę. Siekdami geriausio rezultato, naudodami prietaisą, jį laikykite statmenai.

Pabaigus naudoti


Išjunkite prietaisą. Išpilkite rezervuare likusį skystį. Esant poreikiui, rezervuarą nuo prietaiso rankenos galite nuimti pastumdami rezervuarą žemyn link prietaiso pagrindo. Norėdami rezervuarą uždėti atgal į vietą ant prietaiso rankenos, paprasčiausiai stumtelėkite jį aukštyn link prietaiso viršaus.

Slėgio nustatymas

Nustatyti savo tarpdančių valiklio vandens srovę slėgį galite paprasčiausiai pastumdami galios/slėgio jungiklį, esantį ant rankenos. Pastūmus galios jungiklį aukštyn per vieną padalą, slėgis bus žemas (I), o per 2 padalas (II) - slėgis bus aukštas.

Rekomenduojama valymo technika


Siekdami geriausio rezultato, pradėkite nuo galinių dantų. ir valykite link priekinių dantų.

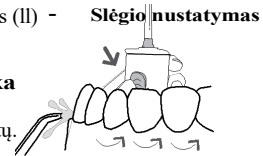

ANTGALIO NAUDOJIMAS

Pik Pocket™ antgalis

Pik Pocket™ antgalis yra specialiai skirtas vandens ar antibakterinių tirpalų purškimui giliai į dantenu kišenės. Norėdami naudoti Pik Pocket® antgalį, **nustatykite žemiausią prietaiso slėgį.** Dėkite minkštą antgalį prie danties 45 laipsnių kampu ir švelniai kiškite antgalį po dantenu linija į kišenę. Įjunkite prietaisą ir tęskite per visą dantenu liniją.

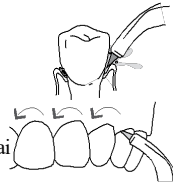


Liežuvio valymo antgalis

Norėdami naudoti liežuvio valiklio antgalį, nustatykite žemiausią slėgį, laikykite antgalį ties liežuvio viduriu, arčiau liežuvio šaknies, ir įjunkite tarpdančių valiklį vandens srove. Stumkite link liežuvio galo lengvai paspausdami. Didinkite spaudimą pagal savo poreikius.




Ortodontinis antgalis

Norėdami naudoti ortodontinį antgalį, švelniai slinkite antgalį palei dantenu liniją, trumpam sustodami, kad švelniai pavalytumėte vietą tarp dantų ir aplink ortodontinių kablių dalį prieš pereidami prie kito danties.

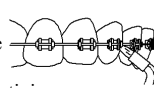

Dantų šepetėlio antgalis

Dantų šepetėlio antgalį galima naudoti su arba be dantu pastos. Įjunkite tarpdančių valiklį vandens srove, kad vanduo pradėtų tekėti per antgalį. Naudodami **nedidelį slėgį** (šereliai neturėtų lenktis), masažuokite trumpais judesiais pirmyn - atgal taip, kaip darytumėte įprastu dantų šepetėliu.

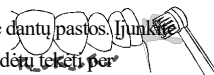

Plaque Seeker® antgalis

Norėdami naudoti Plaque Seeker® antgalį, laikykite jį netoli danties taip, kad šereliai švelniai liestų dantį. Švelniai slinkite antgalį palei dantenu liniją trumpam sustodami tarp dantų, kad švelniai išvalytumėte ir leistumėte vandeniui tekėti tarp dantų.

Burnos skalavimo ir kitų skysčių naudojimas

Savo Waterpik® irigatorių galite naudoti burnos skalavimo ir kitų antibakterinių tirpalų purškimui. Panaudoję specialųjį skystį, išplaukite prietaisą, kad užkirstumėte kelią užsikimšimui, dalinai pripildydami

rezervuarą šiltu vandeniu ir paleisdami įrenginį, kai šio antgalis nukreiptas į kriauklę, kol rezervuaras ištuštės.

Valymas

Niekada nemerkitė prietaiso į vandenį. Kai reikia, gaminių valykite naudodami minkštą audinį ir švelnų valiklį. Vandens rezervuaras lengvai nuimamas, kad būtų galima lengvai išvalyti, taip pat saugu jį plauti viršutiniame indaplovės stalčiuje. Rekomenduojama rezervuarą nuimti ir išvalyti kas savaitę.



Kietųjų vandens nuosėdų šalinimas

Priklausomai nuo mineralų kiekio, esančio vandenyje, prietaise gali susikaupti kalkių. Jeigu gaminio neprižiūrėsite, jos gali trikdyti prietaiso darbą. Vidinių dalių valymas: į pilną rezervuarą šilto vandens įpilkite 2 valgomuosius šaukštus baltojo acto.

Nukreipkite rankeną ir antgalį į kriauklę. ĮJUNKITE įrenginį ir palikite jį veikti tol, kol rezervuaras ištuštės. Išskalaukite pakartodami procedūrą, tik šį kartą rezervuarą pripildykite švariu šiltu vandeniu.

Siekiant užtikrinti optimalų prietaiso veikimą, šią procedūrą atlikite kas 1 - 3 mėnesius.

AA Baterijų priežiūra ir išmetimas

- Alkaline bei NiMH pakraunamos baterijos yra tinkamos šiam prietaisui.
- Baterijos turi būti įdėtos atitinkamais poliais.
- Panaudotos baterijos turi būti išmintos iš tarpdančių valiklio ir išmestos tam skirtoje vietoje.
- Energijos tiekimo gnybtai turi būti apsaugoti nuo trumpo jungimo.
- Nedeginkite baterijų norėdami jų atsikratyti.
- Naudojamos AA baterijos tipas ir kokybė daro įtaką gaminio veikimui.
- Visas baterijas keiskite vienu metu, naudodami naujas to paties tipo ir rūšies baterijas.
- Baterijas keiskite tada, kai pastebite prietaiso veikimo pakitimus.
- Jei prietaiso nenaudosite ilgą laiką, išimkite baterijas.

ĮSPĖJIMAS: Ličio baterijų naudojimas gali padaryti žalą prietaisui, tokiu atveju garantija negalios.



Aptarnavimas

Waterpik® irigatoriumi techninio aptarnavimo paslaugos ir prietaisams nereikalingas reguliarus aptarnavimas. Visas dalis ir priedus rasite adresu www.waterpik.lt

Taip pat galite paskambinti mums numeriu +37062026601 Visuose susirašinėjimuose nurodykite serijos ir modelio numerius. Šie numeriai yra nurodyti įrenginio apačioje. Vis dar turite klausimų? Apsilankykite tinklalapyje www.waterpik.lt. Water Pik, Inc. garantuoja naujiems šio gaminio naudotojams, kad medžiagos yra be defektų ir atsako už gaminio kokybę 2 metus nuo įsigijimo datos. Bus prašoma, kad pirkejas pateiktų užpildytą ir anspauduota originalią garantinę knygelę kaip įsigijimo datos įrodymą ir, jei reikės, visą gaminį, kad įrodytų garantinio aptarnavimo poreikį. Water Pik, Inc. savo nuožiūra, pakeis bet kurią gaminio detalę, kuri, jos nuomone, yra sugedusi, su sąlyga, kad gaminiu nebuvo piktnaudžiaujama, kad jis nebuvo netinkamai naudojamas, keičiamas ar sugadintas po įsigijimo, nebuvo naudojamas ne pagal instrukcijas ir, kad buvo naudojamas tik su Water Pik, Inc. patvirtintais priedais ir naudojamomis detalėmis. Pirkejas atsakingas už prietaiso diegimą ir šiam procesui garantija neteikiama. Ši ribota garantija neapima

priedų ar naudojamų dalių, tokių kaip antgaliai, baterijos ir t.t. Ši garantija suteikia jums konkrečias juridines teises. Galite turėti ir kitų teisių, priklausomai nuo jūsų gyvenamojoje vietoje galiojančių įstatymų.

LIETUVIŲ

