


waterpik®

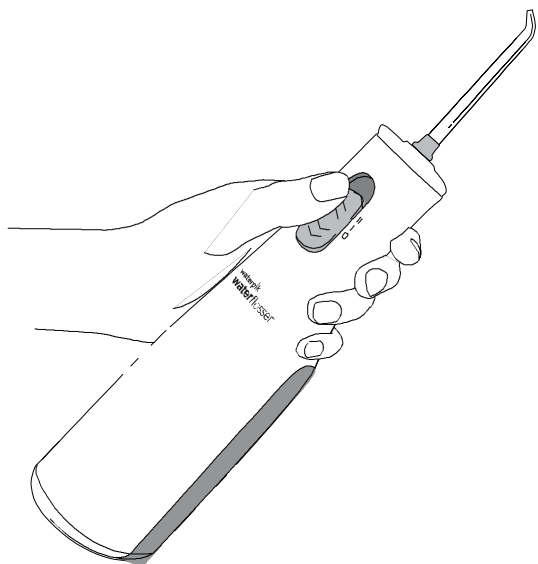

Waterpik®
mates irrigators
Modelis WF-02

.....

www.waterpik.lt

Svarīgi piesardzības pasākumi	3
Izstrādājuma apraksts	5
Ar ko sākt	7
<i>Waterpik</i> ® zobstarpu tīrītāja mazgāšana ar ūdens strūklu un traucējumu novēršana	8
Ierobežota viena gada garantija	9

SVARĪGI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Lietojot elektroierīces, jo īpaši, ja tuvumā atrodas bērni, vienmēr būtu jāveic pamata drošības pasākumi, tai skaitā:

PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET VISU INSTRUKCIJU.

BRĪDINĀJUMS:


Lai mazinātu traumu gūšanas risku:

- Nenovirziet ūdeni zem mēles, ausī, degunā vai citās jutīgās vietās. Šis izstrādājums spēj radīt tādu spiedienu, kas var nopietni bojāt šīs vietas.
- Nenovirziet ūdeni uz degunu vai ausi. Krāna ūdenī vai hloru nesaturošā akas ūdenī var būt dzīvībai bīstamas amēbas *Naegleria fowleri*, kas, nonākot šajās daļās, var būt nāvējošas.
- Izmantojiet šo izstrādājumu tikai tā, kā norādīts šajā instrukcijā vai kā ieteicis jūsu zobu kopšanas speciālists.
- Šajā izstrādājumā neievietojiet uzlādējamās vai maināmās litija baterijas. Šāda tipa baterijas var radīt lietotājam neērtu spiedienu, turklāt tas var bojāt ierīci. Ja tiks izmantotas litija baterijas, garantija nebūs spēkā.

- Izmantojiet tikai *Water Pik, Inc.* ieteiktos uzgaļus un piederumus.
- Izstrādājuma atverē neievietojiet/nebāziet nekādus svešķermeņus.
- Neizmantojiet šo izstrādājumu ārā un vietās, kur izmanto aerosola (izsmidzināmus) izstrādājumus vai kur piekļūst skābeklis.
- Kopā ar šo izstrādājumu neizmantojiet jodu, balinātāju vai ūdenī nešķīstošu koncentrētu ēterisko eļļu. To izmantošana var pasliktināt izstrādājuma darbību un saīsināt izstrādājuma kalpošanas laiku.
- Uzpildiet tvertni tikai ar ūdeni vai citu zobu kopšanas speciālista ieteiktu šķīdumu.
- Pirms šā izstrādājuma lietošanas izņemiet mutes rotas.
- Nelietojiet, ja uz mēles vai mutē ir vaļējas brūces.
- Ja jūsu ārsts pirms zobu kopšanas procedūras ir ieteicis ārstēšanu ar antibiotikām, tad pirms šīs ierīces vai jebkura cita mutes dobuma higiēnas līdzekļa lietošanas jums būtu jākonsultējas ar savu zobārstu.

- Nepieciešama stingra uzraudzība, ja ierīci izmanto bērni vai cilvēki ar īpašām vajadzībām, vai viņu klātbūtnē ierīci izmanto cita persona.
- Pieskatiet bērnus un gādājiet par to, lai viņi nerotaļātos ar ierīci.


SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU

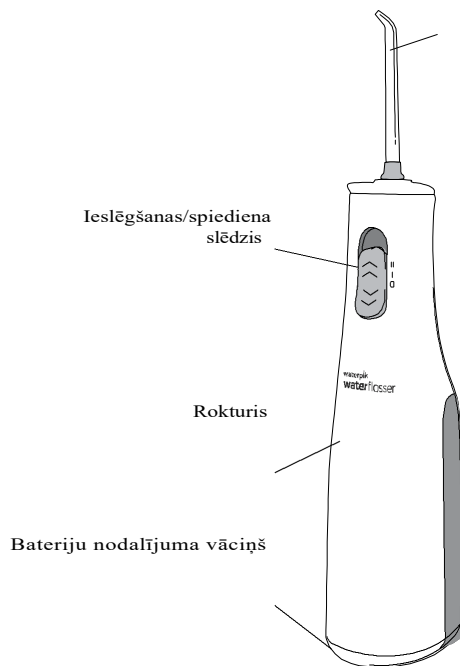





Uzgalis

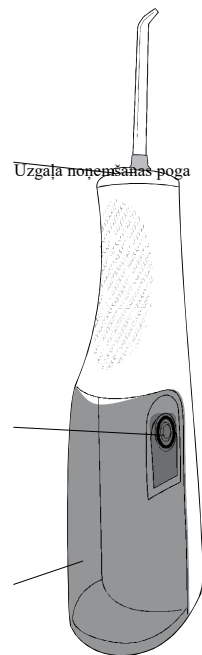Aizverama
ūdens
ieliešanas
atvere

Tvertne



Mainīt ik pēc 3 mēnešiem	
Ortodontiskais uzgalis	VISPIEMĒROTĀKAIS
	<input checked="" type="checkbox"/> Breketēm <input checked="" type="checkbox"/> Vispārīgai lietošanai
„Pik Pocket™” uzgalis	VISPIEMĒROTĀKAIS
	<input checked="" type="checkbox"/> Periodonta kabatām <input checked="" type="checkbox"/> Sazarojumiem
„Plaque Seeker®” uzgalis	VISPIEMĒROTĀKAIS
	Implantiem Venīriem Kronīšiem Vispārīgai lietošanai Tiltiem
Zobu birstes uzgalis	PIEMĒROTS
	<input checked="" type="checkbox"/> Vispārīgai lietošanai

Mainīt ik pēc 6 mēnešiem	
Klasiskais smidzinātāja uzgalis	PIEMĒROTS
	<input checked="" type="checkbox"/> Vis
	Mēles tīrītājs PIEMĒROTS
	<input checked="" type="checkbox"/> Svaigākai elpai


PIEZĪME: ne visi uzgaļi ir visos modeļos.

Maināmos uzgaļus/piederumus var iegādāties interneta veikalā www.waterpik.lt vai zvanot pa tālruni +37062026601. Lai iegūtu plašāku informāciju par uzgaļiem, citiem piederumiem un izstrādājuma lietošanu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.waterpik.lt.


1. Bateriju ievietošana




Noņemiet ūdens tvertni.

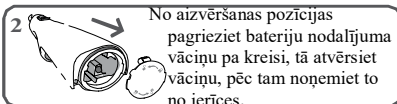

No aizvēršanas pozīcijas pagrieziet bateriju nodalījuma vāciņu pa kreisi, tā atvērsiet vāciņu, pēc tam noņemiet to no ierīces.

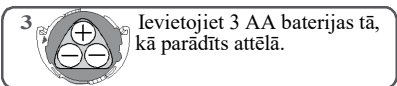

Ievietojiet 3 AA baterijas tā, kā parādīts attēlā.

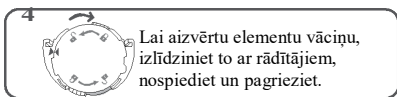

Lai aizvērtu elementu vāciņu, izlīdziniet to ar rādītājiem, nospiediet un pagrieziet.

Baterijas mainiet tad, kad pamanāt samazinātu spiedienu.

Tvertnes piepildīšana

Paceliet tvertnes vāciņu un piepildiet ar rēndenu ūdeni.

Uzgaļu uzlikšana un noņemšana

Uzlieciet uzgali tam paredzētā vietā irigatora roktura centrā.

Lai noņemtu uzgali no roktura, nospiediet uzgaļa noņemšanas pogu un noņemiet uzgali no roktura.



Saudzīgi virziet uzgali gar smaganu līniju, īsi apturot, lai iztīrītu zobstarpas. Turpiniet tik ilgi, kamēr iztīrīsiet zobstarpas gan no ārpuses, gan iekšpusē. Novirziet smidzinātāja strūklu uz smaganām 90 grādu leņķī. Mazliet paveriet lūpas un ļaujiet ūdenim iztecēt izlietnē. Lai sasniegtu vislabāko rezultātu, izmantojot ierīci, turiet to vertikāli.

Pēc lietošanas

Izslēdziet ierīci. Izlejiet atlikušo šķidrumu no tvertnes. Vajadzības gadījumā varat noņemt tvertni no ierīces roktura, pabīdot tvertni uz leju virzienā uz ierīces pamatni. Lai uzliktu tvertni atpakaļ savā vietā uz ierīces roktura, vienkārši bīdiet to uz augšu virzienā uz ierīces augšpusi.


Spiediena iestatīšana

Zobstarpu tīrītāja ar ūdens strūklu spiedienu varat iestatīt, vienkārši pabīdot uz roktura esošo jaudas/spiediena slēdzi.

Pabīdot jaudas slēdzi uz augšu par vienu iedaļu, spiediens būs zems (I), par 2 iedaļām (II) - **Spiediena iestatīšana** — spiediens būs augsts.

Ieteicamā tīrīšanas tehnika

Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, sāciet no aizmugurējiem zobiem un tīriet virzienā uz priekšējiem zobiem.

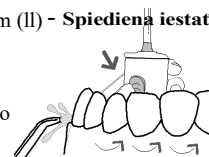

UZGAĻA LIETOŠANA

Pik Pocket™ uzgali


Pik Pocket™ uzgali ir īpaši paredzēts ūdens vai antibakteriālo šķīdumu smidzināšanai dziļi smaganu kabatās. Lai izmantotu *Pik Pocket®* uzgali, **ierīcē noregulējiet zemāko spiedienu.**

Miksto uzgali tuviniet zobam 45 grādu leņķī un maigi virziet uzgali zem smaganu līnijas, uz kabatu. Ieslēdziet ierīci un turpiniet pa visu smaganu līniju.




Mēles tīrīšanas uzgali

Lai izmantotu mēles tīrītāja uzgali, iestatiet zemāko spiedienu, turiet uzgali mēles vidū, tuvāk mēles saknei, un ieslēdziet zobstarpu tīrītāju ar ūdens strūklu. Bīdīet virzienā uz mēles galu, viegli paspiežot. Palieliniet spiedienu pēc savām vajadzībām.

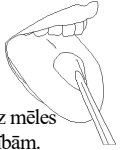

Ortodontiskais uzgali

Lai izmantotu ortodontisko uzgali, maigi slidiniet uzgali gar smaganu līniju, īsi apturot, lai maigi iztīrītu vietu starp zobiem un ap ortodontiskajām breketēm, pirms pārejat pie nākamā zoba.

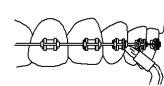

Zobu birstes uzgali


Zobu birstes uzgali var izmantot ar zobu pastu vai bez tās. Ieslēdziet zobstarpu tīrītāju ar ūdens strūklu, lai ūdens sāktu plūst caur uzgali. Izmantojot **nelielu spiedienu** (sariņiem nebūtu jālokās), īsām kustībām masējiet uz priekšu un atpakaļ tā, kā jūs to darītu ar parasto zobu birsti.



tvertni ar siltu ūdeni un ieslēdziet ierīci, tās uzgali pavēršot uz izlietni, kamēr tvertne būs tukša.

Tīrīšana

Nekad nemērciet ierīci ūdenī. Nepieciešamības gadījumā tīriet izstrādājumu ar mīkstu lupatiņu un saudzīgu tīrīšanas līdzekli. Ūdens tvertne ir viegli noņemama, lai varētu viegli iztīrīt, turklāt to var droši mazgāt trauku mazgājamās mašīnas augšējā nodalījumā. Ieteicams noņemt tvertni un iztīrīt katru nedēļu.

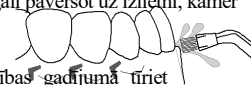

Cieto ūdens nogulšņu likvidēšana

Atkarībā no ūdenī esošo minerālvielu daudzuma ierīcē var veidoties kaļķis. Ja nerūpēsieties par izstrādājumu, tas var ietekmēt ierīces darbu. Iekšējo daļu tīrīšana: pilnā tvertnē silta ūdens ielejiet 2 ēdamkarotes baltā etiķa.

Plaque Seeker® uzgali

Lai izmantotu *Plaque Seeker®* uzgali, turiet to tuvu zobam tā, lai sariņi maigi skartu zobu. Saudzīgi virziet uzgali gar smaganu līniju, īsi apturot starp zobiem, lai maigi iztīrītu un ļautu ūdenim plūst starp zobiem.

Mutes skalošanas un citu līdzekļu lietošana

Savu *Waterpik®* irigatoru varat izmantot mutes skalošanas un citu antibakteriālo šķīdumu izsmidzināšanai. Izmantojot speciālu šķīdrumu, izmazgājiet ierīci, lai novērstu nosprostošanos, līdz pusei piepildiet



Novirziet rokturi un uzgali uz izlietni. IESLĒDZIET ierīci un atstājiet to ieslēgtu, kamēr tvertne būs tukša. Izskalojiet, atkārtojot procedūru, tikai šoreiz piepildiet tvertni ar tīru siltu ūdeni.

Lai nodrošinātu optimālu ierīces darbību, šo procedūru izpildiet ik pēc 1–3 mēnešiem.

AA bateriju kopšana un atbrīvošanās no tām

- *Alkaline* un *NiMH* uzlādējamās baterijas ir piemērotas šai ierīcei.
 - Ievietojiet baterijas, jāievēro atbilstošā polaritāte.
 - Izmantotās baterijas ir jāizņem no zobstarpu tīrītāja un jānodod tās paredzētā vietā.
 - Enerģijas padeves spaiļes ir jāaizsargā no īssavienojuma.
 - Lai atbrīvotos no baterijām, nededziniet tās.
 - Izmantojamās AA baterijas tips un kvalitāte ietekmē izstrādājuma darbību.
 - Visas baterijas mainiet vienā reizē, izmantojot jaunas tāda paša tipa un veida baterijas.
 - Baterijas mainiet tad, kad pamanāt izmaiņas ierīces darbībā.
 - Ja ilgāku laiku neizmantošiet ierīci, izņemiet baterijas.
- BRĪDINĀJUMS: litiņa baterijas var bojāt ierīci, tādā gadījumā garantija nebūs spēkā.



Apkalpošana

Waterpik® irigatoram un ierīcēm nav nepieciešami tehniskās apkalpošanas pakalpojumi un regulāra apkalpošana. Visas daļas un piederumus atradīsiet adresē www.waterpik.lt.

Jūs varat arī piezvanīt mums pa tālruna numuru +37062026601. Visās sarakstēs norādiet sērijas numuru un modeļa numuru. Šie numuri ir norādīti zem ierīces. Vai jums ir vēl kādi jautājumi? Apmeklējiet tīmekļa vietni www.waterpik.lt. *Water Pik, Inc.* jauniem šā izstrādājuma lietotājiem garantē, ka materiāliem nav defektu un atbild par izstrādājuma kvalitāti divus gadus no iegādes datuma. Tiks lūgts, lai pircējs iesniedz aizpildītu un apzīmogotu oriģinālo garantijas grāmatiņu kā iegādes datuma apliecinājumu un, ja nepieciešams, pašu izstrādājumu, lai pierādītu nepieciešamību pēc garantijas apkalpošanas. *Water Pik, Inc.*, pēc saviem ieskatiem, nomainīs jebkuru izstrādājuma detaļu, kas, pēc tās domām, ir sabojājusies, ar nosacījumu, ka pēc iegādes apiešanās ar izstrādājumu notikusi pareizi un ka tas ticis pareizi izmantots saskaņā ar norādījumiem un tikai ar *Water Pik, Inc.* apstiprinātiem piederumiem un detaļām. Pircējs ir atbildīgs par ierīces iestatīšanu, un uz šo procesu garantija neattiecas. Šī ierobežotā garantija neietver piederumus vai izmantojamās detaļas piemēram, uzgaļus, baterijas utt. Šī garantija sniedz jums konkrētas likumīgas tiesības. Jums var būt arī citas tiesības atkarībā no jūsu dzīvesvietā spēkā esošajiem tiesību aktiem.

