


waterpik®
treat yourself better™

Waterpik® Ultra Dental Water Jet

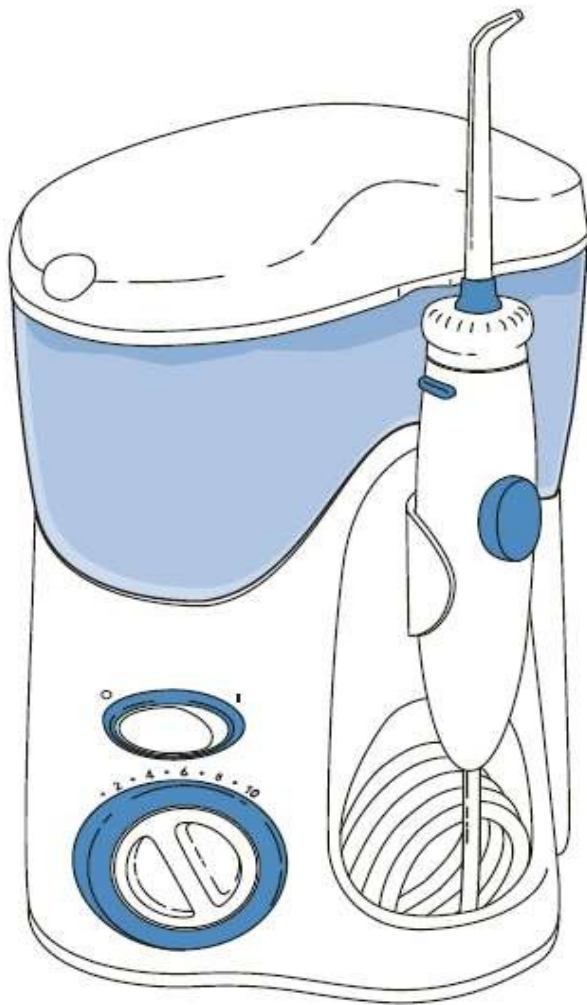

ÕNNITLUS

Õnnitleme! Valides *Waterpik® UltraDental Water Jet*, liigute õiges suunas – Teie igemed hakkavad olema tervemad ja naeratus kaunim!

Kliiniliselt testitud pulsseeriva veejoaga *Waterpik® Ultra Dental Water Jet* eemaldab sügavale hammaste ja igemete vahele kogunenud bakterid, mida vaid hambaharjaga kätte ei saa.

Oleme veendunud, et Te ei kahetse ja jääte rahule uue *Waterpik® Ultra Dental Water Jetiga*. Täname, et olete valinud *Waterpik® Ultra Dental Water Jet*.

Traditsiooniline suuhooldus



Tavaline hambapesu ei eemalda kõiki kogunenud toidujääke ja kahjulikke baktereid.



Hambaniit piirab ligipääsu igemepiirist allapoole.

Suuhooldus *Waterpik® Ultra Dental Water Jetiga*.



Waterpik® Ultra Dental Water Jet eemaldab sügavale igemete vahele jäänud toidujäägid ja kahjulikud bakterid.

SISUKORD

OLULISED OHUTUSNÕUDED	Error! Bookmark not defined.
SEADME KIRJELDUS	Error! Bookmark not defined.
ETTEVALMISTUS KASUTAMISEKS	Error! Bookmark not defined.
SUU-IRRIGAATORI HOOLDUS	12
RIKETE EEMALDAMINE	Error! Bookmark not defined.

OLULISED OHUTUSNÕUDED

OLULISED OHUTUSNÕUDED

Kasutades elektriseadmeid, eriti siis, kui tegevuses osalevad lapsed, peate alati jälgima alljärgnevat ohutusnõudeid.

ENNE KASUTAMIST LUGEGE LÄBI KASUTUSJUHEND.

OHT:

Et vältida õnnetusjuhtumeid, järgige alljärgnevat juhiseid:

- Kui olete lõpetanud seadme kasutamise, lülitage see alati välja.
- Ärge lülitage seadet välja märgade kätega.
- Ärge asetage seadet kohta, kust ta võib kukkuda vanni, dušikabiini või kraanikaussi.
- Ärge kasutage seadet vannis olles.
- Ärge asetage seadet vette või teistesse vedelikesse.
- Ärge üritage tõsta seadet välja, kui see on kukkunud ükskõik millisesse vedelikku. Võtke pistik kohe vooluvõrgust välja.
- Kontrollige toitejuhete võimalike kahjustuste osas enne seadme esimest kasutamist ja ka hiljem kogu kasutamise aja.

HOIATUS!

Et vähendada põletuste, elektrišoki, tulekahju, tõsise kahjustuste või väiksemate vigastuste ohtu:


- Ärge kasutage seadet, kui juhe või ühendus on kahjustatud, kui see ei tööta nõuetekohaselt, on maha kukkunud või kahjustatud või kukkunud mõne vedeliku sisse. Tagastage seade volitatud teeninduskeskusesse või Water Pik, Inc.
- Õpetage ja jälgige lapsi või erivajadustega isikuid, kes soovivad seadet kasutada.
- Ärge suunake veejuga keele alla, kõrva, ninasse või muudesse tundlikesse kohtadesse. Seade võib tekitada sellist rõhku, mis võib tõsiselt kahjustada neid kehaosasid. Vt „Kasutusjuhend“, kuidas kasutada seadet nõuetekohaselt.
- Kasutage seda seadet vaid nii, nagu on sätestatud selles instruktsioonis või nagu soovitas Teie hambaarst.
- See toode on valmistatud nii, et seda saaks kasutada järjest 5 minuti vältel. Kui seadet kasutab enam kui üks isik, laske seadmel puhata umbes 5 minutit pärast iga kasutamist.
- Kasutage seadet ainult koos standardotsikute, Pik Pocket® otsikute, keelekaabitsa ja ortodontiliste otsikutega, mille kasutamist soovitab Water Pik, Inc.
- Ärge eemaldage Pik Pocket® paindlikku otsikut selle varrelt. Kui otsik mingil põhjusel ära tuleb, visake ära mõlemad – nii otsik kui ka vars – ning asendage uue Pik Pocket® otsikuga.
- Reservuaari valage vett või muid soovitatud vedelikke.

OLULISED OHUTUSNÕUDED

- Elektrijuhet hoidke võimalikult kaugel kuumaks minevatest pindadest
- Ärge kasutage seadet seal, kus kasutatakse hapniku- või aerosoolpihusteid.
- Seade on kasutamiseks tubastes tingimustes. Ärge kasutage seadet õues.
- Ärge kasutage seadet, kui kannate suuehteid. Eemaldage need enne iga kasutamist.
- Ärge kasutage seadet ka siis, kui keelel on lahtiseid haavu.
- Kui Teie arst või kardioloog soovitas Teil tarbida antibiootikume enne iga hambaprotseduuri, enne selle seadme kasutama hakkamist või mõne muu seadmega suuhügieeni tagamist, peate konsulteerima oma odontoloogiga.

JÄRGIGE KASUTUSJUHENDIS ÄRA TOODUD JUHISEID.


SEADME KIRJELDU

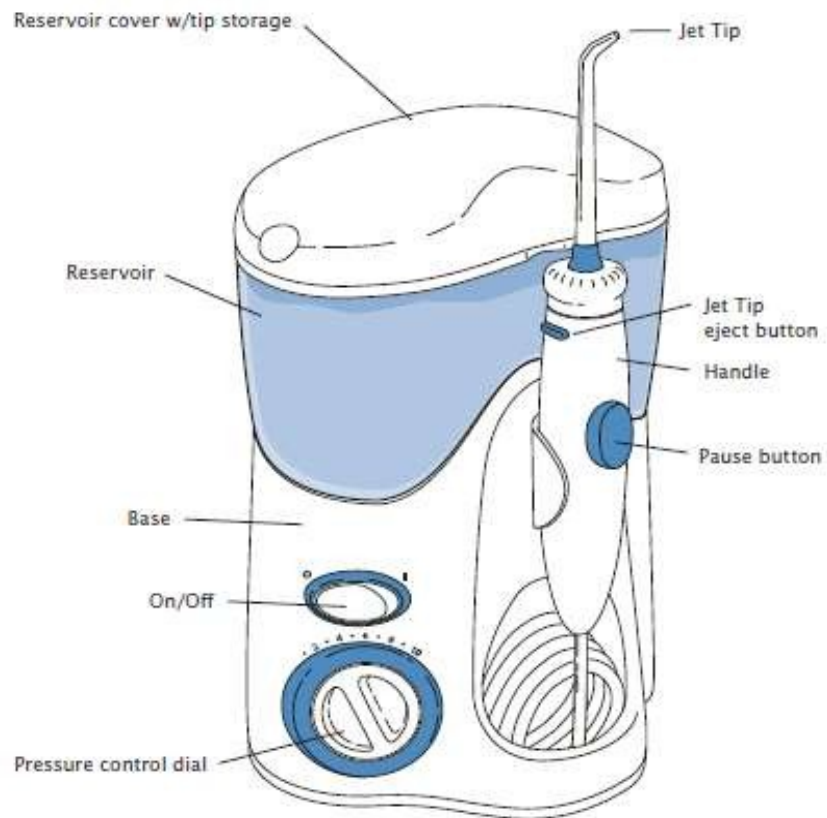


Seadme osad:

- Reservuaari kaas/otsikute hoidmise koht
- Otsik
- Reservuaar
- Otsiku eemaldamise nupp
- Käepide
- Peatamise nupp
- Rõhu juhtimise käepide
- Sisse- /väljalülitamise nupp
- Alus

PRIETAISO APRAŠYMAS

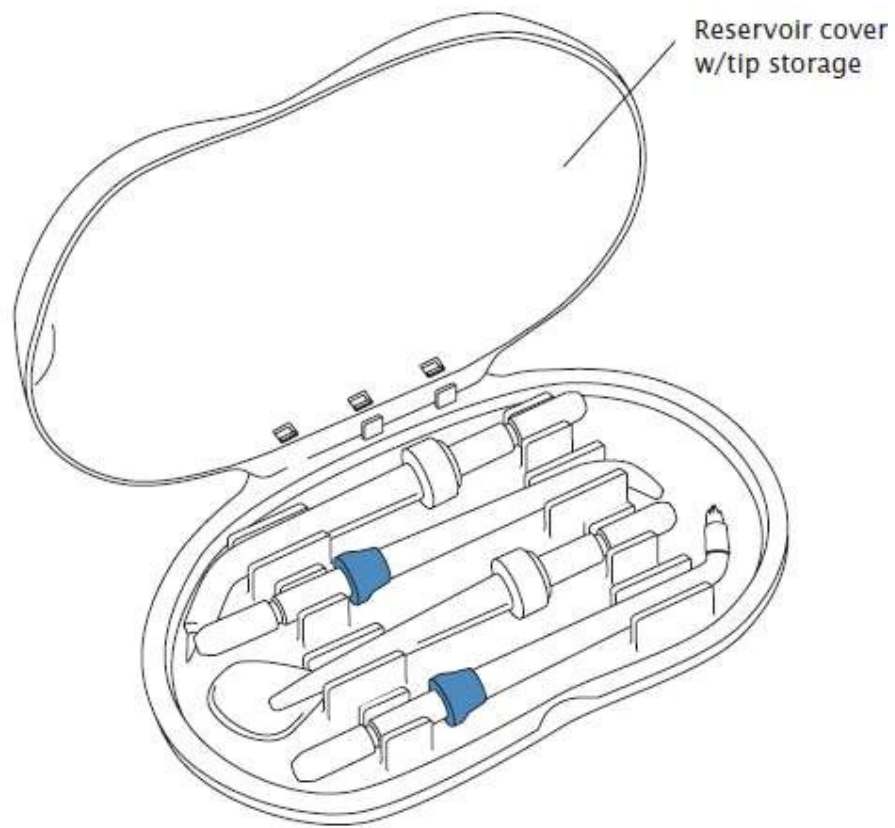

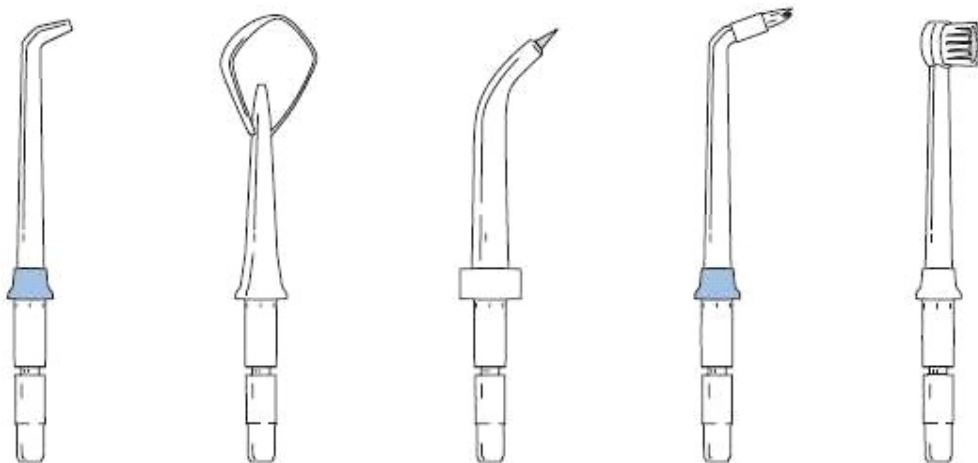

Standardotsik; Keelekaabits; Otsik Pik Pocket®; Ortodontiline otsik; Hambaharja otsik


ETTEVALMISTUS KASUTAMISEKS

Ijunkite laido kištuką į elektros lizdą. Jei el. lizdas yra valdomas sieniniu jungikliu, įsitinkite, kad jis yra įjungtas.




Reservuaari ettevalmistamine

Võtke reservuaar ja kaas aluse küljest lahti. Täitke reservuaar leige veega. Vajutage reservuaar aluse sisse.

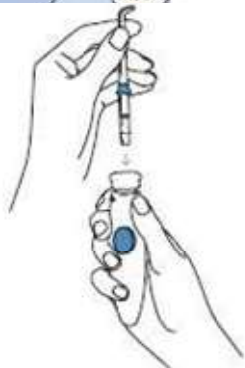

Ühendage seadme toitejuhe voluvõrku. Kui seadet juhitakse seinälülitist, veenduge, et see on sisselülitatud

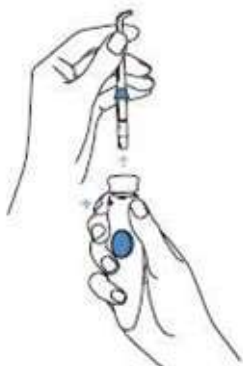

Otsiku vahetamine

Asetage otsik seadme käepideme ülemisse osasse. Kui fikseerite otsiku õigesti, ühendub värviline rõngas korralikult käepideme otsikuga. Otsiku käepidemelt eemaldamiseks vajutage otsiku eemaldamise nuppu ja võtke otsik käepidemelt.



Rõhu reguleerimine

Esimene kord seadet kasutades pöörake rõhu reguleerimise käepide madalaimasse asendisse (mäрге nr 1).Järk-järgult tõstke rõhku vajaliku tasemeni, mida nagu on soovitanud Teie odontoloog.



Asend suus


Kummarduge ette kraanikausi kohale ja asetage otsik suhu. Suunake otsik hammaste suunas.

Vaba käega lülitage seade sisse. Seadistage Teile vajalik rõhk.




Suunake voolu, pöörates ümmarguse käepideme osa, mis asub käepideme ülemises osas.

Soovitatav tehnika

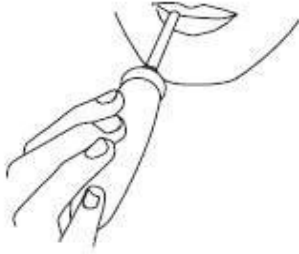

Suunake vool 90-kraadise nurga all igemete suunas. Pange huuled veidi koomale, et vältida veepritsmeid, kuid lubage veel voolata suust kraanikaussi. Kui soovite saavutada parimaid tulemusi, alustage purihammastest (tagumised hambad) ja liikuge esimeste hammaste suunas. Laske seadme otsikul liikuda hammaste joonel, peatuge lühidalt hambavahede juures. Jätkake seni, kuni kõik kohad hammaste ümber ja nende vahel on puhtad.

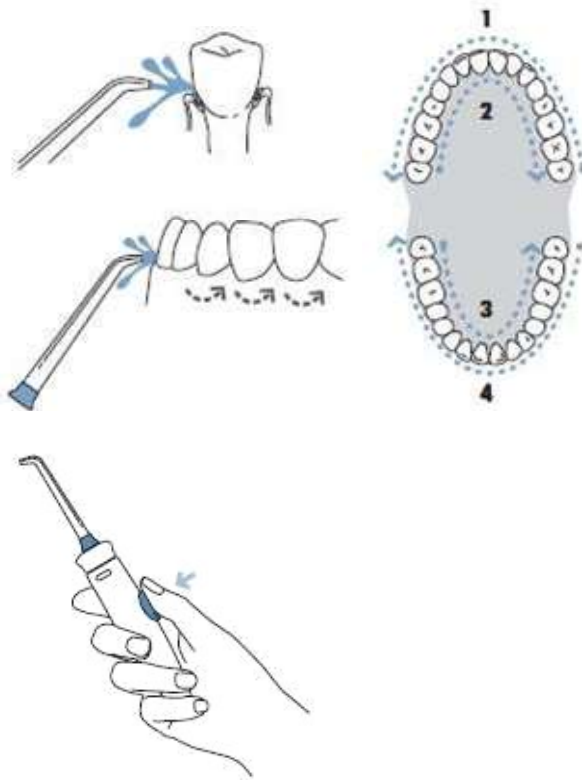

Peatamise nupp

Saate ajutiselt peatada seadme töö igal ajahetkel, kui vajutate alla nupu, mis on käepidemel.

Lõpetamine

Lülitage seade välja. Valage reservuaarist välja kogu ülejäänud vesi. Lülitage seade vooluvõrgust välja.




Nõuanded

Pik Pocket™ otsik

Pik Pocket® otsikust liigub vesi või antibakteriaalne vedelik otse hambavahedesse. Et kasutada Pik Pocket® otsikut, kummardage kraanikausi kohale, hoidke pehmet otsikut hammaste kohal 45-kraadise nurga all ja suruge otsik õrnalt igemete alla, hambavahedesse. Seadistage seade madalaimasse rõhutasemesse ja puhastage õrnalt igemeid, asetades otsiku hammaste vahele. Jätkake, liikudes otsikuga hambajoonel seni, kuni reservuaar saab tühjaks.

Keelekaabits

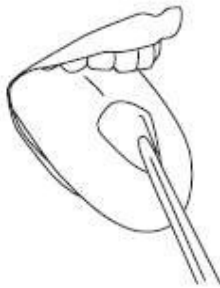


Asetage keelekaabits keelele ja alustage puhastamist madalaima tasemega ning tõstke seda nii, et Teil oleks mugav. Asetage keelekaabits keele keskosale või keele keskjoonele umbes poole keele peale ja liikuge nõrgalt vajutades allasuunas

Hambaharja otsik

Asetage hambaharjapeaga seade suhu hammaste ja igemete joonele.

Hambaharjaotsikut võib kasutada hambapastaga või ilma. Lülitage seade sisse nii, et vesi voolaks läbi otsiku. Kui kasutate nõrka rõhku (harjased ei tohi vajuda), tõmmake harja ette ja taha lühikese amplituudiga umbes nii, nagu seda teeksite käsihambaharjaga. Korrake seda kõikide hammastega. Vesi voolab läbi hambaharja ning aitab samaaegselt puhastada ning loputada hamba pealmist osa.

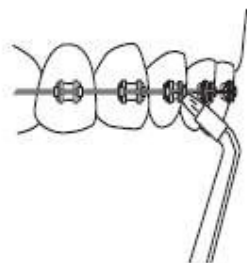

Ortodontiline otsik

Alustage viimasest purihambast. Suunake otsik 90-kraadise nurga all hambale igemete juures. Laske seadme otsikul liikuda hammaste joonel, peatuge lühidalt hambavahede juures ja ortodontiliste breketite juures. Jätkake seni, kuni kõik hambad on puhtad.

Loputusvedeliku kasutamine ja teised seadmed

Teie Water Pik® seadet võib kasutada loputusvedeliku ja teiste antibakteriaalsete vahenditega. Paluge, et Teie ortodont soovitaks Teile sobivaima vahendi. Tähelepanu: mõningate antibakteriaalsete vahendite kasutamine võib kahjustada Teie Waterpik® suu-irrigaatorit. Kui Teil on tekkinud küsimusi teatud vahendite kasutamise kohta, võtke ühendust Water Pik, Inc klienditeenindusega. Pärast ükskõik millist antibakteriaalse vahendi kasutamist reservuaaris, loputage reservuaar. Täitke reservuaar poolenisti veega. Suunake irrigaator kraanikaussi. Lülitage seade sisse ja oodake, kuni see on tühjaks voolanud. See aitab kaitsta otsikut saaste ja kahjustuste eest, nii töötab Teie seade kauem.

Kui soovite saavutada optimaalseid tulemusi, soovitame asendada ortodontilised otsikuid 6-kuuse kasutuse järel.

SUU-IRRIGAATORI HOOLDUS

Vajadusel puhastage seadet pehme kanga ja õrna puhastusvahendiga

Enne puhastamist tõmmake pistik vooluvõrgust välja.

Enne irrigaatori demonstreerimist külmemates tingimustest, võtke ära reservuaar ja valage kogu vedelik ära.

RIKETE EEMALDAMINE

PROBLEEM

PÕHJUS

PARANDAMINE

Standartotsikud ja keelekaabits Leke otsiku ja rõngakujulise käepideme detaili kohal käepidemel.	Otsik ei ole täiesti sees	Võtke otsik välja ja asetage tagasi
Pik Pocket® otsik Ava pehmes otsikus	Otsik on kulunud	Asendage uue otsikuga.
Suu-irrigaatori korpus Veeleke käepidemes	Vooliku defekt	Seda saavad parandada seadme tarnijad või Water Pik, Inc.
Leke reservuaaris	Puuduv reservuaari klapp Kas reservuaari klapp on tagurpidi?	Asendage reservuaari klapp (helistage Water Pik, Inc. või seadme tarnijatele). Pöörake klapp õigeks.
Mittesobiv rõhk	Valesti paigutatud reservuaar	Tõstke reservuaar ümber, vajutage kõvasti.
Seade ei käivitu	Mootor ei tööta.	Veenduge, kas elektripistik töötab; kontrollige teise seadme abil (kontrollige ülekoormuse nuppu ja/või seinalülitit)