


waterpik®
treat yourself better™

***Waterpik®
Ultra Dental Water Jet***

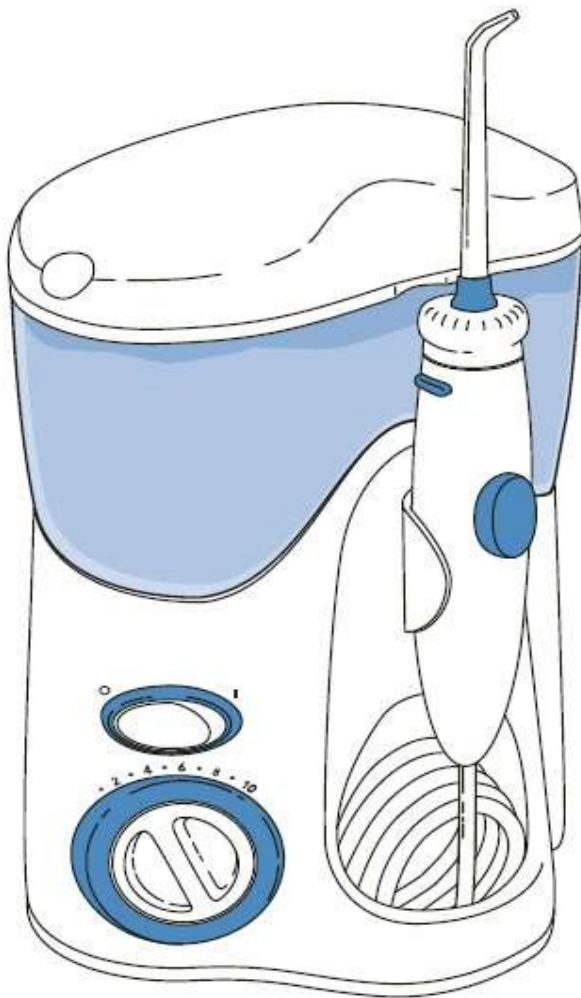

APSVEIKUMS

Apsveicam! Izvēloties *Waterpik® Ultra Dental Water Jet*, Jūs dodaties pareizā virzienā, lai saglabātu veselās smaganas un veselīgāku smaidu!

Ar klīniski pārbaudītu ūdens spiediena un pulsācijas kombināciju *Waterpik® Ultra Dental Water Jet* likvidē dziļi starp zobiem un zem smaganām esošās kaitīgas baktērijas, kurām vien ar zobu birsti netiksiet klāt.

Esam pārliecināti, ka jūs nenožēlosiet un būsiet apmierināti, iegādājoties jauno *Waterpik® Ultra Dental Water Jet*. Paldies, ka izvēlaties *Waterpik® Ultra Dental Water Jet*.

Tradicionālā mutes dobuma kopšana



Ikdienas zobu tīrīšana viegli netiek galā ar paslēpušām ēdiena paliekām un kaitīgām baktērijām.

Zobu diegs ierobežo pieeju zem



smaganu līnijas.

**Mutes dobuma kopšana ar
*Waterpik® Ultra Dental Water Jet***



Waterpik® Ultra Dental Water Jet likvidē dziļi starp zobiem esošās ēdiena paliekas un kaitīgās baktērijas.

SATURS

SVARĪGI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI	2
IERĪCES APRAKSTS	6
SAGATAVOŠANĀS	8
MUTES IRIGATORA KOPŠANA	13
BOJĀJUMU NOVĒRŠANAS PAMĀCĪBA.....	13

SVARĪGI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Izmantojot elektroierīces, it sevišķi, ja tuvumā ir bērni, vienmēr vajadzētu ievērot šādus pamata piesardzības pasākumus.

PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET VISU INSTRUKCIJU.

APDRAUDĒJUMS:

Lai samazinātu nelaiemes gadījumu skaitu, izmantojot elektrisko strāvu:

- Pēc ierīces izmantošanas vienmēr izslēdziet to.
- Neskariet ierīces slēdzi ar slapjām rokām.
- Nenovietojiet un neģlabāji ierīci vietā, kur tā var iekrist vannā, duškabīnē vai izlietnē.
- Neizmantojiet ierīci mazgāšanās laikā.
- Neiemērciet ūdenī vai citā šķidrumā.
- Nemēģiniet izvilkt ierīci, kas iekritusi kādā šķidrumā. Nekavējoties izvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Pārbaudiet barošanas avota vadu, vai nav kādi bojājumi, pirms ierīces lietošanas pirmo reizi un visā tās kalpošanas laikā.

BRĪDINĀJUMS:

Lai samazinātu apdegumu, elektrošoka, ugunsgrēka, smagu traumu vai audu bojājuma risku:


- Neizmantojiet šo produktu, ja tā vads vai savienojums ir bojāti, ja tas nedarbojas pareizi, ja tas ticis nomests vai sabojāts, vai iemērķts kādā šķidrumā. Atdodiet produktu atpakaļ pilnvarotā pakalpojumu centrā vai *Water Pik, Inc.*
- Uzmanīgi māciet apieties un pieskatiet bērnus, kā arī cilvēkus ar īpašām vajadzībām, ja viņi vēlas pareizi izmantot šo ierīci.
- Nenovirziet ūdeni zem mēles, ausī, degunā vai citās jutīgās vietās. Šī ierīce spēj radīt tādu spiedienu, kas var nopietni kaitēt šīm ķermeņa vietām. Sk. pareizas lietošanas instrukciju.
- Izmantojiet šo ierīci tikai tā, kā noteikts šajā instrukcijā vai kā ieteicis jūsu zobu kopšanas speciālists.
- Šis produkts ir izstrādāts tā, lai to izmantotu 5 minūtes vienā lietošanas reizē. Ja ierīci izmanto vairāki cilvēki, ļaujiet ierīcei atpūsties vismaz 5 minūtes pēc katras lietošanas.
- Izmantojiet tikai *Water Pik, Inc.* ieteiktos piederumus, proti, standarta uzgaļus, *Pik Pocket®* uzgaļus, mēles tīrītāju un ortodontiskos uzgaļus.
- Nenonemiet *Pik Pocket®* lokano uzgali no tīrā statīva. Ja tie kāda iemesla dēļ atdalās, izmetiet abus — gan uzgali, gan statīvu — un nomainiet pret jaunu *Pik Pocket®* uzgali.
- Piepildiet ūdens tvertni tikai ar ūdeni vai citu ieteikto šķīdumu.

SVARĪGI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

- Elektrības vadu neturiet uzkarstošu virsmu tuvumā.
- Nelietojiet ierīci vietās, kur izmanto skābekļa vai aerosola smidzinātājus.
- Ierīce ir paredzēta lietošanai tikai mājas apstākļos. Neizmantojiet to ārpus mājas, ārā.
- Neizmantojiet ierīci, ja tobrīd mutē ir kādas rotas. Pirms lietošanas vienmēr izņemiet tās.
- Neizmantojiet ierīci arī tad, ja uz mēles ir vaļējas brūces.
- Ja jūsu ārsts vai kardiologs ir ieteicis dzert antibiotikas pirms katras zobārstniecības procedūras, tad, pirms sākat izmantot šo mutes irigatoru vai kādu citu ierīci vai rīku, lai uzturētu mutes dobuma higiēnu, jums jākonsultējas ar savu zobārstu.

IEVĒROJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS


IERĪCES APRAKSTS

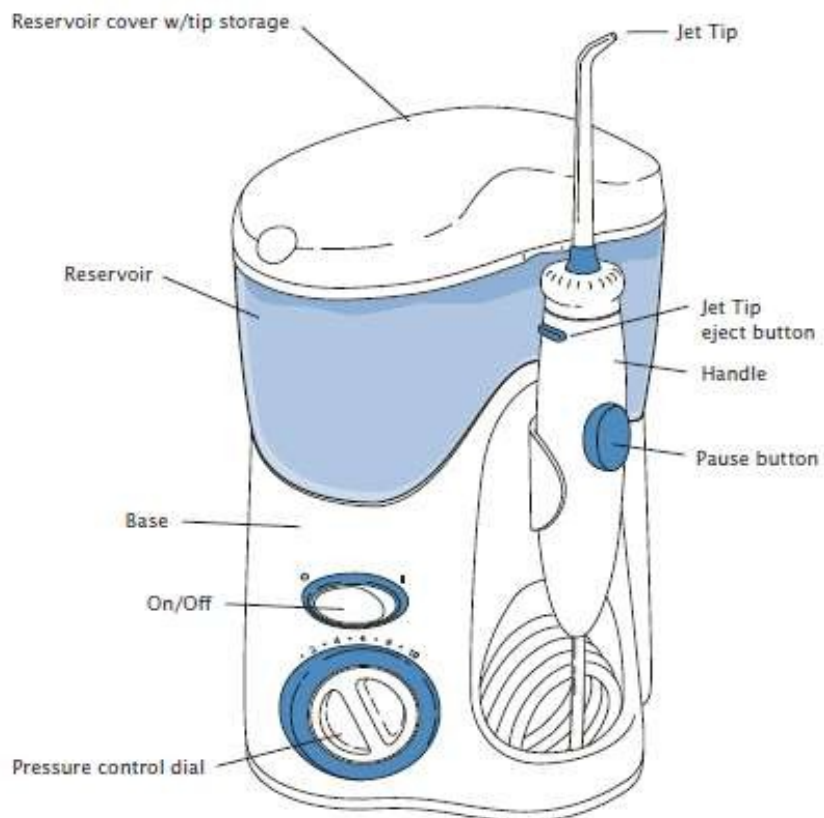


Ierīci veido:

- Tvertnes vāks/vieta uzgaļu glabāšanai
- Uzgalis
- Tvertne
- Uzgaļa izņemšanas poga
- Rokturis
- Apturēšanas poga
- Spiediena vadības rokturītis
- Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
- Pamatne

IERĪCES APRAKSTS

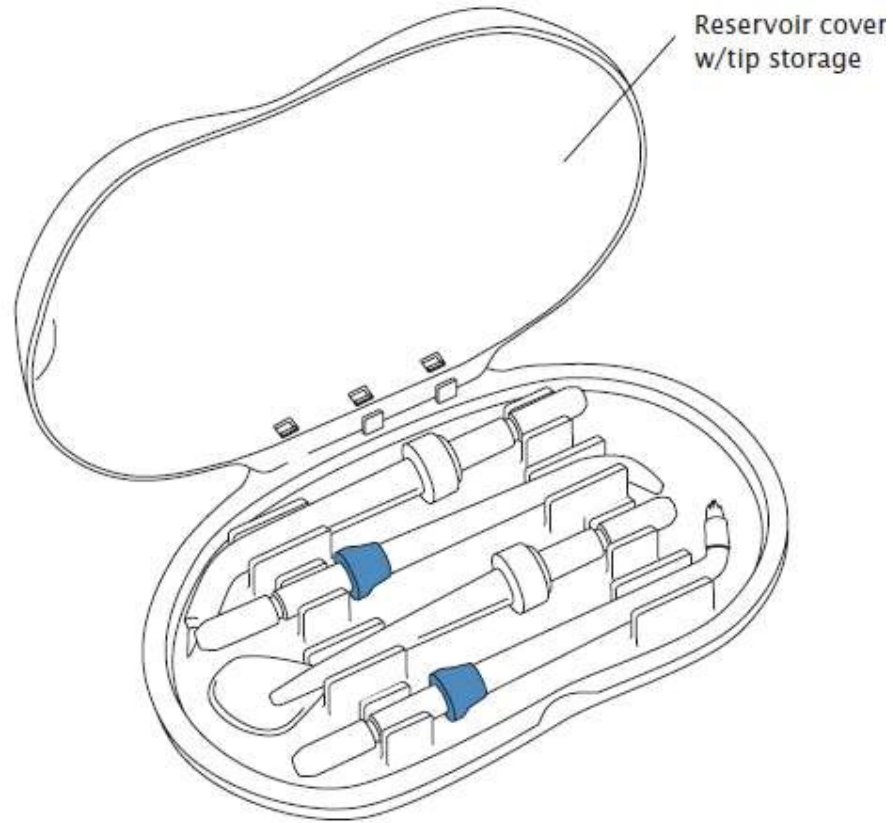

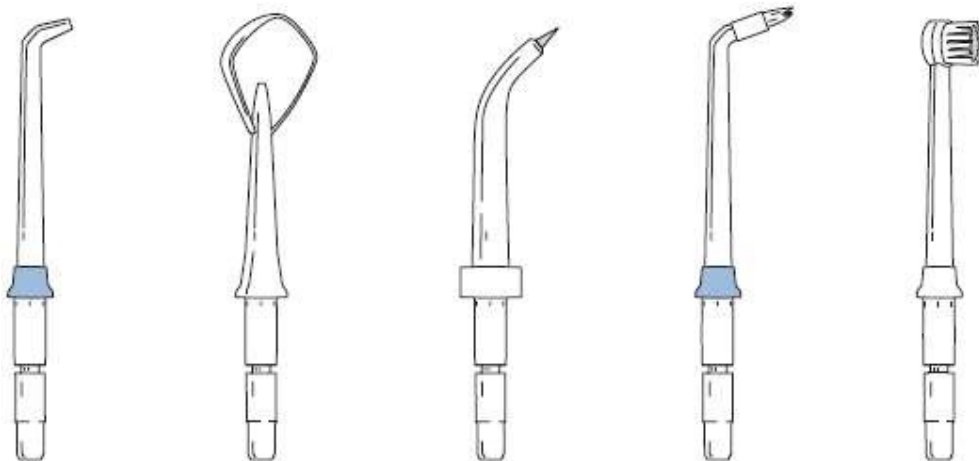

Standarta uzgalis; Mēles tīrītājs; Pik Pocket® uzgalis; Ortodontiskais uzgalis; Zobu birstes uzgalis


SAGATAVOŠANĀS

Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā. Ja kontaktligzda vadāma ar sienas slēdzi, pārlicinieties, vai tas ir ieslēgts.



Tvertnes sagatavošana


Atdaliet tvertni un vāku no pamatnes. Piepildiet tvertni ar remdenu ūdeni. Uzlieciet tvertni virs pamatnes un stipri iespiediet.

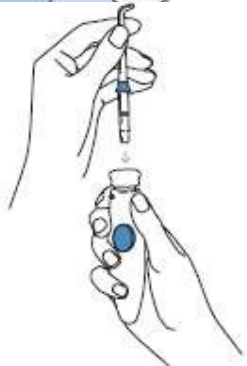

Uzgaļu maiņa

Ievietojiet uzgali mutes irigatora roktura augšējā daļā. Ja pareizi nofiksēsiet uzgali, krāsainais aplis labi savienosies ar roktura galu. Lai noņemtu uzgali no roktura, nospiediet uzgaļa noņemšanai paredzēto pogu un izvelciet uzgali.

SAGATAVOŠANĀS

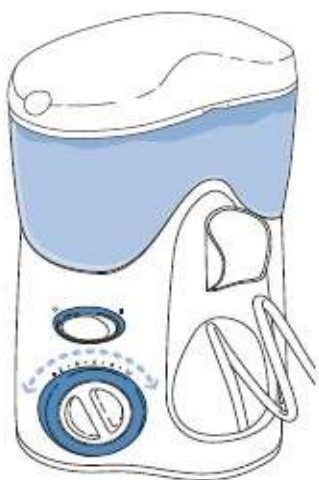

Spiediena regulēšana


Lietojot ierīci pirmo reizi, vispirms pagrieziet spiediena regulēšanas rokturīti uz zemāko iedaļu (spiediena iedaļa Nr. 1). Pakāpeniski palieliniet spiedienu līdz jums vajadzīgajai iedaļai vai līdz tai iedaļai, ko noteicis jūsu zobārsts.



Stāvoklis mutē

Pieliecieties zemu virs izlietnes un ievietojiet uzgali mutē. Turiet uzgali virzienā uz zobiem.

Ar brīvo roku ieslēdziet irigatoru. Iestatiet jums vajadzīgo spiediena iedaļu.

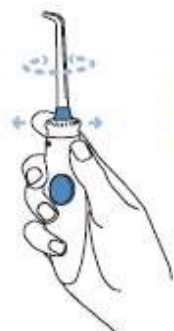


Novirziet strūklu, pagriežot roktura augšējā daļā esošo lodveida formas rokturīti.

Ieteicamā tehnika



Novirziet strūklu 90 grādu leņķī smaganu virzienā. Mazliet pieveriet lūpas, lai izvairītos no ūdens šļakatām, bet ļaujiet ūdenim brīvi tecēt no mutes uz izlietni. Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, sāciet ar dzerokļiem (pie aizmugurējiem zobiem) un turpiniet virzienā uz priekšējiem zobiem. Ļaujiet irigatora uzgalim slīdēt gar smaganu līniju, uz īsu brīdi apstājoties pie zobstarpām. Turpiniet tikmēr, kamēr visi zobi un zobstarpas būs tīras.

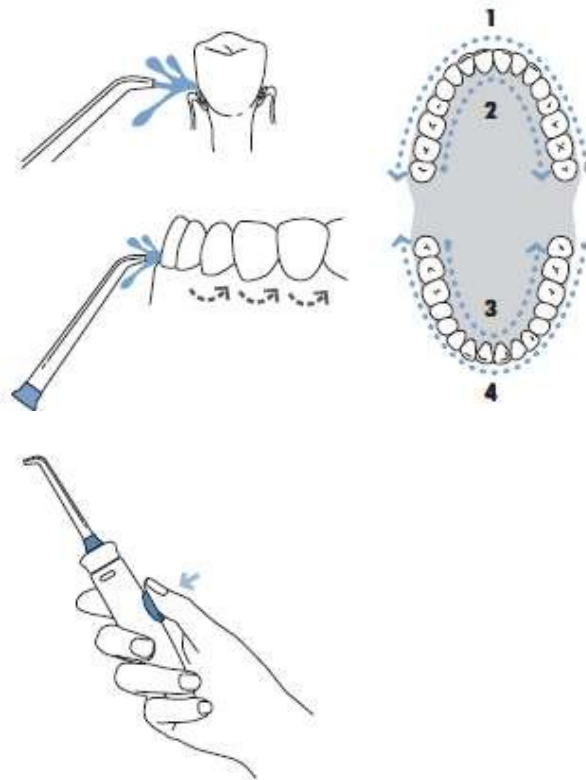

Apturēšana

Jūs varat īslaicīgi apturēt plūsmu jebkurā brīdī, nospiežot uz roktura esošo apturēšanas pogu.

Nobeigums


Izslēdziet ierīci. No tvertnes izlejiet visu atlikušo ūdeni. Atvienojiet ierīci no elektrības.



Padomi


***Pik Pocket*® uzgali**

Pik Pocket® uzgali padod ūdeni vai antibakteriālos šķīdumus dziļi zobstarpās. Lai izmantotu *Pik Pocket*® uzgali, pieliecieties zemu virs izlietnes un turiet mīksto uzgali pie zoba 45 grādu leņķī, un maigi pietuviniet uzgali zem smaganām, zobstarpās. Ieslēdziet ierīci ar zemāko spiediena līmeni un maigi tīriet pie smaganām, ievietojot uzgali starp zobiem. Turpiniet, kustinot uzgali gar smaganu līniju tikmēr, kamēr tvertne būs tukša.

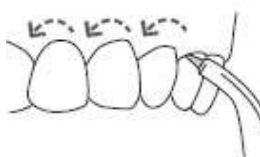


Mēles tīrītājs

Novietojiet mēles tīrītāju uz mēles un sāciet zobu tīrīšanu — izmantojiet zemāko spiediena līmeni un palieliniet to, kā jums ir ērti. Maigi uzlieciet mēles tīrītāju uz mēles vidusdaļas vai tās viduslīnijas virzienā uz aizmuguri un ar vieglu spiedienu virzieties uz priekšu.

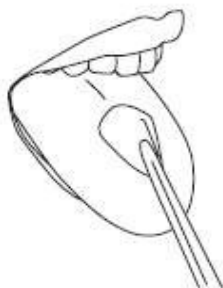

Zobu birstes uzgali

Ievietojiet zobu birstes uzgali mutē ar birstes galviņu uz zoba gar smaganu līniju. Zobu birstes uzgali var izmantot gan ar zobu pastu, gan bez tās. Ieslēdziet mutes irigatoru tā, lai ūdens strūkļa plūstu caur uzgali. Izmantojot nelielu spiedienu (sariņiem nebūtu jālokās), īsām kustībām groziet birsti uz priekšu un atpakaļ tā, kā jūs to darītu ar parasto zobu birsti. Atkārtojiet to pašu ar blakus zobiem. Ūdens tecēs caur birsti, lai palīdzētu vienlaikus gan tīrīt, gan skalot zoba virsmu.

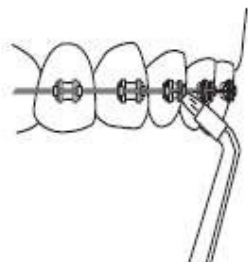

Ortodontiskais uzgalis

Sāciet ar pēdējo dzerokli. Novirziet uzgali 90 grādu leņķī uz zobu gar smaganām. Ļaujiet irigatora uzgalim slīdēt gar smaganu līniju. Lai saudzīgi iztīrītu, uz īsu brīdi apturiet pie zobstarpām un ap ortodontiskajām breketēm. Turpiniet tikmēr, kamēr visi zobi būs tīri.

Mutes skalojamā līdzekļa lietošana un citi līdzekļi

Waterpik® mutes irigatoru var izmantot kopā ar mutes skalojamo līdzekli un citiem antibakteriāliem līdzekļiem. Palūdziet, lai zobārsts iesaka jums piemērotāko līdzekli. Uzmanību: dažu antibakteriālo līdzekļu lietošana var ietekmēt *Waterpik*® mutes irigatora darbību. Ja jums ir radušies jautājumi par kādu līdzekļu lietošanu kopā ar mutes irigatoru, sazinieties ar *Water Pik, Inc.* klientu apkalpošanas nodaļu. Pēc jebkura antibakteriālā līdzekļa lietošanas veltiet mazliet laika, lai izskalotu tvertni. Piepildiet tvertni līdz pusei ar siltu ūdeni. Novirziet irigatoru uz izlietni. Ieslēdziet ierīci un ļaujiet tai tecēt, kamēr tvertne būs tukša. Tas palīdzēs pasargāt uzgali no nosprostošanās un bojājumiem, tādējādi jūsu ierīce kalpos ilgāk.

Lai sasniegtu optimālus rezultātus, iesakām mainīt ortodontiskos uzgaļus pēc 6 mēnešu lietošanas.

MUTES IRIGATORA KOPŠANA

Vajadzības gadījumā tīriet ierīci ar mīkstu lupatiņu un saudzīgu tīrīšanas līdzekli.

Pirms tīrīšanas izvelciet kontaktdakšu no kontaktlīdzdas.

Pirms irigatora demonstrēšanas vēsākos apstākļos, noņemiet tvertni un izlejiet visu šķidrumu.

BOJĀJUMU NOVĒRŠANAS PAMĀCĪBA

PROBLĒMA	IEMESLS	RĪCĪBA
Standarta uzgali un mēles tīrītājs Noplūde starp uzgali un apļa formas rokturi	Nav pilnībā ievietots uzgali	Izņemiet uzgali un vēlreiz ievietojiet roktura augšpusē.
Pik Pocket® uzgalis Plaisa mīkstajā uzgalī	Uzgalis ir nolietojies	Nomainiet to pret jaunu uzgali.
Mutes irigatora korpuss Ūdens noplūde rokturī	Šļūtenītes defekts	To var salabot ierīces piegādātāji vai <i>Water Pik, Inc.</i>
Noplūde tvertnē	Trūkst tvertnes ventiļa vai tvertnes ventilis ir ar kājām uz augšu	Nomainiet tvertnes ventili (zvaniet <i>Water Pik, Inc.</i> vai ierīces piegādātājiem). Apgrieziet ventili uz pareizo pusi.
Neatbilstošs spiediens	Nepareizi ievietota tvertne	Ievietojiet tvertni vēlreiz, stipri iespiediet to.
Ierīce neieslēdzas	Nedarbojas motors	Pārlicinieties, vai darbojas kontaktlīdzda; pārbaudiet ar citas ierīces palīdzību (pārbaudiet pārslodzes pogu un (vai) sienas slēdzi).