


waterpik

„Waterpik®“ suu-irrigaator Mudelid WP-250/260/270/300/305

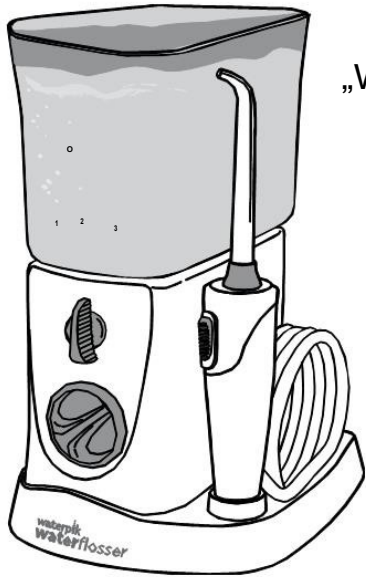

www.waterpik.it

SISUKORD

| | |
|--|-----------|
| <u>OLULISED OHUTUSNÕUDED</u> | <u>3</u> |
| <u>TOOTE KIRJELDUS</u> | <u>5</u> |
| <u>MILLEST ALUSTADA</u> | <u>7</u> |
| <u>PUHASTAMINE JA RIKETE TUVASTAMINE</u> | <u>9</u> |
| <u>PIIRATUD KAHEAASTANE GARANTII</u> | <u>10</u> |

OLULISED OHUTUSNÕUDED

Elektriseadmete kasutamisel, eriti kui läheduses viibivad lapsed, tuleb alati järgida peamisi ohutusnõudeid, kaasa arvatud:

ENNE KASUTAMIST LUGEGE LÄBI KASUTUSJUHEND.

OHT:

Et vähendada elektrilöögi tekkimise ohtu:

- Kui olete lõpetanud seadme kasutamise, ärge unustage seade lülitada välja.
- Ärge katsuge seadet märgade kätega.
- Ärge asetage seadet vette või teistesse vedelikesse.
- Ärge kasutage vannis olles.
- Ärge hoidke seadet seal, kust ta võib kukkuda vanni või kraanikaussi.
- Ärge üritage tõsta seadet välja, kui see on kukkunud vette.
- Võtke pistik kohe vooluvõrgust välja.


HOIATUS:





Et vähendada põletuste, elektrišoki, tulekahju, tõsise kahjustuste või väiksemate vigastuste ohtu:

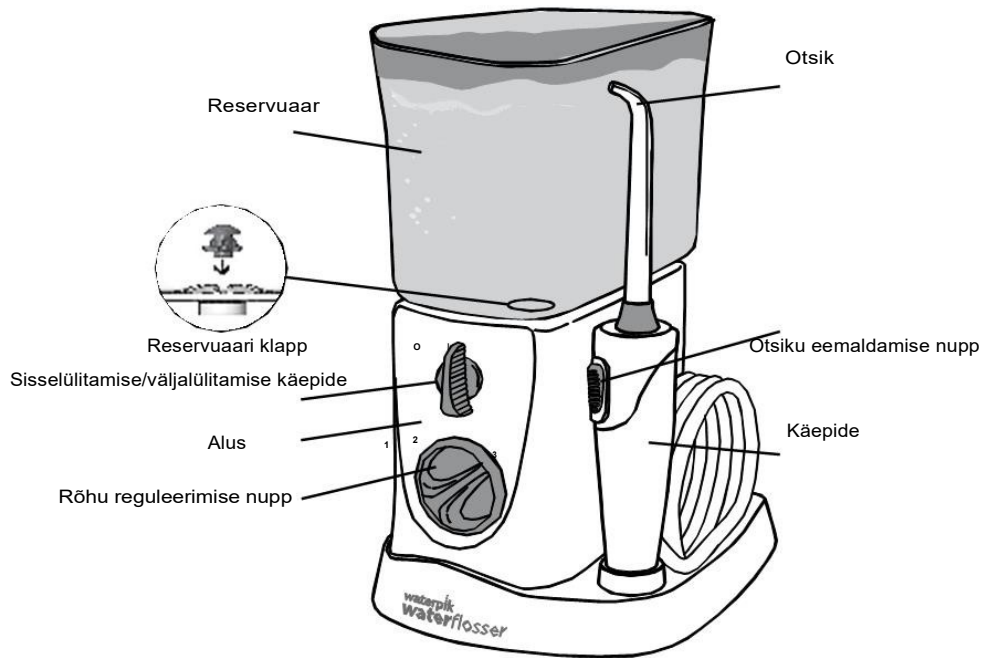

- Ärge kasutage seadet süsteemis, mis erineb seadmel või laadjal märgitud pingega süsteemist.
- Ärge kasutage seadet, kui juhe või ühendus on kahjustatud, kui see ei tööta nõuetekohaselt, on maha kukkunud või kahjustatud või kukkunud mõne vedeliku sisse. Võtke ühendust Water Pik, Inc. kohaliku esindajaga UAB Vilniaus medicinos servisas www.waterpik.lt
- Ärge suunake veejuga keele alla, kõrva, ninasse või muudesse tundlikesse kohtadesse. See toode võib tekitada sellist survet, mis võib neid kohti tõsiselt vigastada.
- Ärge suunake veejuga ninasse või kõrva. Kraanivees või kloreerimata kaevuvees võivad olla eluohtlikud amööbid *Naegleria fowleri*.
- Kasutage seda toodet ainult nii, nagu on kirjeldatud selles kasutusjuhendis või nagu on soovitanud teie suuhügienist.
- Kasutage ainult WaterPik, Inc. soovitatud otsikuid ja lisasid.
- Ärge toppige mingeid kõrvalisi esemeid seadme avaustesse
- Hoidke toitejuhett eemal kuumadest pindadest.
- Ärge kasutage seadet õues ega seal, kus kasutatakse pihustatavaid aerosooltooteid või kus toimub hapnikuga varustamine.
- Ärge kasutage selles seadmes joodi, valgendit või mittelahustuvaid kontsentreeritud eeterlikke õlisid. Nende kasutamine võib halvendada seadme toimimist ja lühendada kasutusaega.
- Reservuaari valage vett või suuhügienisti soovitatud muid vedelikke.
- Enne selle seadme kasutamist eemaldage suust kõik ehted.
- Ärge kasutage, kui keelel või suus on haavandeid.

- Kui hambaarst soovitas teile enne hambahoolduse protseduure antibiootikumiravi, siis peate enne selle või mõne teise suuõone hügieeniseadme kasutamist pidama nõu oma suuhügienistiga.
- Range järelevalve on vajalik, kui seadet kasutavad lapsed või puudega isikud või kui need isikud viibivad läheduses siis, kui seadet kasutab teine isik.
- Kui Pik Pocket otsik (ei ole kõigis mudelites)
- Kui mingilgi põhjusel ei sobi seadmele, asendage vana otsik uue Pik Pocket otsikuga.
- Ärge kasutage seadet kauem kui 5 minutit kahetunnise perioodi jooksul.
- Jälgige, et lapsed ei mängiks seadmega.
- Seade on varustatud polariseeritud pistikut (üks osa on laiem kui teine). Et vähendada elektrilöögist tekkida võivat riski, selle pistiku saab vooluvõrku panna vaid ühte kindlat pidi. Kui pistik ei mahu pistikupesasse, pöörake see ringi ja proovige veel üks kord. Kui see ikka ei mahu, pöörduge abi saamiseks kvalifitseeritud elektriku poole. Ärge üritage ise vahetada juhet või pistikut.

**HOIDKE SEE KASUTUSJUHEND
ALLES.**



| Vahetada iga 3 kuu tagant | |
|---|--|
| Ortodontiline otsik  | SOBIVAIM <input checked="" type="checkbox"/> Breketid <input checked="" type="checkbox"/> Üldkasutus |
| Pik Pocket™ otsik  | SOBIVAIM <input checked="" type="checkbox"/> Periodont. taskutele <input checked="" type="checkbox"/> Hargnemistele |
| Plaque Seeker® otsik  | SOBIVAIM <input checked="" type="checkbox"/> Implantaadid <input checked="" type="checkbox"/> Hambakroonid <input checked="" type="checkbox"/> Sillad <input checked="" type="checkbox"/> Üldkasutus |
| Hambaharjaotsik  | SOBIVAIM <input checked="" type="checkbox"/> Üldkasutus |

| Vahetada iga 6 kuu tagant | |
|---|--|
| Klassikaline pihustusotsik  | SOBIVAIM <input checked="" type="checkbox"/> Üldkasutus |
| Keelekaabits  | SOBIVAIM <input checked="" type="checkbox"/> Suuõõne värskendamiseks |

MÄRKUS: Otsikuid mudeli komplektis ei ole.

Vajalikud otsikud/seadmed saate soetada www.waterpik.lt või telefonil +37062026601. Põhjalikumad teavet otsikute, muude lisade ja seadme kasutamise kohta võite leida meie kodulehelt www.waterpik.lt.

Seadme sisselülitamine

Ühendage seade vooluvõrku. Kui seadet juhitakse seinälülitist, veenduge, et see on sisselülitatud..

Ettevalmistamine ja kasutamine

Nõuetekohase kasutusjuhendi leiata juhendi alguses.

Pärast kasutamist

Lülitage seade välja. Valage reservuaarist välja ülejäänud vesi. Võtke seade vooluvõrgust välja.

OTSIKU KASUTAMINE

Pik Pocket™ otsik


Pik Pocket™ otsik on ette nähtud spetsiaalselt vee või bakterivastase lahuse pihustamiseks sügavale igemetaskutesse.

Pik Pocket® otsiku

kasutamiseks valige seadmel kõige madalam surve.

Asetage pehme otsik hambale


45-kraadise nurga all ja suruge otsik õrnalt igemete alla igemetaskusse.

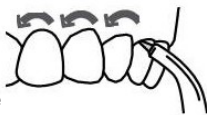

Lülitage seade sisse ja liikuge sellega igemejoonel.

Keele puhastamise otsik


Keele puhastusotsiku kasutamiseks, valige seadmel kõige madalam surve, hoidke otsikut keele keskel võimalikult taga. Lükake ette õrnalt vajutades. Suurendage survet vastavalt oma vajadustele

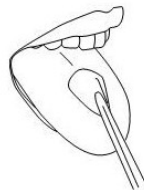

Ortodontiline otsik

Ortodontilise otsiku kasutamiseks liigutage otsikut õrnalt igemepiiril, peatudes hetkeks iga hamba juures, et puhastada hammaste ja ortodontiliste klambrite ümbrus

Jätkake tegevust iga hamba ja breketi juures.

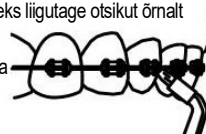


Hambaharja otsik



Asetage hambaharjapeaga seade suhu hammaste ja igemete joonele. Hambaharjaotsikut võib kasutada kas hambapastaga või ilma. Lülitage seade sisse nii, et vesi hakkaks voolama läbi otsiku. Valige madal surve (hambaharja harjased ei tohi painduda), puhastage hambad lühikeste liigutustega ette-taha nii, nagu peseksite hambaid tavalise hambaharjaga.


Plaque Seeker® otsik

Plaque Seeker® otsiku kasutamiseks hoidke seda hammaste lähedal nii, et hambaharja harjased puutuks õrnalt vastu hambaid. Liigutage otsikut õrnalt igemepiiril, peatudes hetkeks hambavahede kohal, et saaksite õrnalt puhastada hambavahed ja lasta veel voolata läbi hammaste vahede.

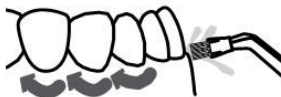

Suuloputusvedeliku ja muude vedelike kasutamine

Oma Waterpik® irrigaatorit saate kasutada suuloputusvedeliku ja teiste bakterivastaste vedelike pihustamiseks. PKui olete kasutanud mingit spetsiaalset vedelikku, peske seade pärast hoolikalt puhtaks, et vältida seadme ummistumist. Täitke reservuaar osaliselt sooja veega, lülitage seade sisse, suunake otsik valamusse ja laske töötada, kuni reservuaar on tühi.

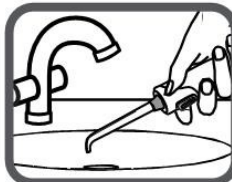

PUHASTAMINE JA RIKETE TUVASTAMINE

Puhastamine

Enne puhastamist tõmmake pistik vooluvõrgust välja.

Vajadusel kasutage seadme puhastamiseks pehmet lappi ja õrnatoimelist puhastusvahendit.

Veerereservuaari eemaldamine on väga lihtne ja puhastamine kerge. Reservuaari võib ohutult pesta ka nõudepesumasina ülemises sahtlis.

MÄRKUS: Eemaldage reservuaariklapp enne kui asetate reservuaari nõudepesumasinasse.



Eemaldage



Asendage

Katlakivi eemaldamine

Sisemiste osade puhastamine: täitke reservuaar sooja veega, lisage 2 supilusikatäit söögiäädikat. Seadistage rõhu reguleerimise käepide maksimumasendisse ja suunake käepide ja otsik valamusse. Lülitage seade sisse ja laske töötada seni, kuni reservuaar on tühi. Peske veel kord täites reservuaar puhta sooja veega

Lekked

Kui leke tekib seoses kahjustatud voolikuga, asendatavad voolikud ja käepidemed saab soetada www.waterpik.lt või võttes ühendust Water Pik Inc. esindajaga UAB Vilniaus medicinos servisas. Kui leke on reservuaarist, veenduge, et klapp on üles tõstetud paremal või võtke ühendust UAB Vilniaus medicinos servisas klapi vahetuse küsimustes.



Teenindus

Waterpik® irrigaatorid on elektrilised seadmed, millele ei kehti teenindusteenuste osutamine ja pidev teenindus. Seadme kõik osad ja lisad leiata internetist aadressil www.waterpik.lt. Samuti võite meile helistada telefonil +37062026601.

Kui vajate abi, nimetage alati seadme seeria ja mudeli numbrid. Need numbrid on märgitud seadme põhjale.

PIIRATUD KAHEAASTANE GARANTII

Water Pik, Inc. garanteerib selle seadme uutele kasutajatele, et kõik materjalid on defektideta, ning vastutab toote kvaliteedi eest soetamise päevast kahe aasta jooksul. Garantiiteeninduse korral palume, et ostja esitaks ostukuupäeva tõendamiseks seadme täidetud ja pitsoriga kinnitatud garantiiraamatu originaali ning vajadusel ka seadme, et saaksime veenduda garantiiteeninduse vajaduses. WaterPik, Inc. vahetab omal äranägemisel välja seadme iga detaili, mis ettevõtte arvates on rikki läinud, tingimusel, et seadet ei ole kuritarvitatud, et seda kasutati otstarbekohaselt, seda ei ole pärast soetamist muudetud ega rikutud, seadet on kasutatud vastavalt kasutusjuhendile ning ainult WaterPik, Inc. kinnitatud originaalsete ja -detailidega.

Installeerimise eest vastutab ostja, garantii ei hõlma seda punkti.

Piiratud garantii ei hõlma lisasid või kasutatavaid osasid, nagu otsikud jne.

See garantii tagab teile konkreetsed juriidilised õigused. Teile võivad kehtida ka muud õigused, mis erinevad olenevalt Teie elukohas kehtivatest seadustest.

