


waterpik®

Waterpik® Burnos irigatorius
Sonic dantų šepetėlis Modelis WP-
860/861/862/
871/872/881/882

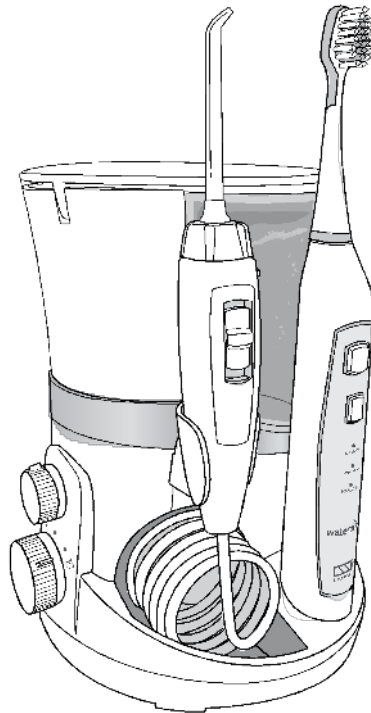

.....
www.waterpik.lt

Svarbios atsargumo priemonės	3
Gaminio aprašymas	5
Nuo ko pradėti naudojantis burnos irigatoriumi	6
Jūsų Waterpik® burnos irigatoriaus valymas ir trikčių šalinimas	8
Ribota burnos irigatoriaus dvejų metų garantija	9
Nuo ko pradėti naudojantis <i>Triple Sonic</i> dantų šepetėliu	10
<i>Triple Sonic</i> dantų šepetėlio priežiūra	10
Ribota <i>Triple Sonic</i> dantų šepetėlio dvejų metų garantija	11


SVARBIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS

Naudojant elektros prietaisus, ypač vaikams esant šalia, visada reikėtų imtis pagrindinių saugumo priemonių, įskaitant:

PRIEŠ NAUDOJIMĄ PERSKAITYTI VISAS INSTRUKCIJAS.

PAVOJUS:

**Norėdami sumažinti
mirties nuo elektros
srovės riziką:**

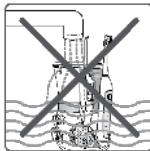

- Nelieskite įkroviklio šlapiomis rankomis.
- Nedėkite ir nemeskite į vandenį ar kitą skystį.
- Nenaudokite maudydamiesi vonioje.
- Nedėkite ir nelaikykite gaminio ten, kur jis galėtų įkristi ar būtų įmestas į vonią ar kriauklę.
- Neimkite gaminio, kuris įkrito į vandenį. Nedelsiant ištraukite kištuką.
- Prieš naudodami pirmą kartą ir po to reguliariai tikrinkite, ar nepažeistas įkroviklio laidas.

ĮSPĖJIMAS:

**Norėdami sumažinti nudegimų, mirties
nuo elektros srovės, gaisro ar
sužeidimų riziką:**

- Nejunkite šio prietaiso į tokią įtampos sistemą, kuri skiriasi nuo ant prietaiso ar įkroviklio nurodytos įtampos sistemos. Prietaiso jungimas į netinkamą įtampą pažeis gaminį, o garantija tokiu atveju NEGALIOS.
- Jeigu gaminys dėl BET KOKIŲ priežasčių yra išardomas, garantija NEGALIOJA.
- Nenaudokite šio gaminio, jei laidas ar kištukas yra pažeistas, jei neveikia tinkamai, jei buvo išmestas ar pažeistas, ar įmestas į vandenį. Susisiekite su Waterpik vietos platintoju, kurį galima rasti adresu internete: www.waterpik.lt
- Nenukreipkite vandens po liežuviu, į ausį, nosį ar kitas jautrias vietas. Šis gaminys geba sudaryti tokius slėgius, kurie gali rimtai pažeisti šias sritis.
- Nenukreipkite vandens į nosį ar ausį. Vandenyje iš čiaupo ar nechloruotame šulinio vandenyje gali būti pavojingų gyvybei amebų Naegleria fowleri, kurios, patekusios į šias sritis, gali būti mirtinos.
- Šį gaminį naudokite tik taip, kaip nurodyta šiose instrukcijose, arba kaip rekomenduoja jūsų dantų priežiūros specialistas.
- Naudokite tik Water Pik, Inc. rekomenduojamus antgalius ir priedus.

- Laikykite elektros laidą atokiai nuo karštų paviršių.
- Nenaudokite irigatoriaus arba Sonic dantų šepetėlio lauke ir nesinaudokite juo ten, kur naudojami aerozoliniai (purškiami) gaminiai arba kur tiekiamas deguonis.
- Irigatoriuje nenaudokite jodo, balnikio ar vandenyje netirpių koncentruotų eterinių aliejų. Jų naudojimas gali pabloginti gaminio veikimą ir sutrumpinti gaminio naudojimo laiką.
- Irigatoriaus rezervuarą pildykite tik vandeniu ar kitu dantų priežiūros specialisto rekomenduojamu tirpalu.
- Prieš naudodami irigatorių arba Sonic dantų šepetėlį, pašalinkite burnos papuošalus.
- Nenaudokite nei irigatoriaus, nei Sonic dantų šepetėlio, jei ant liežuvio ar burnoje yra atvirų žaizdų.
- Jei jūsų gydytojas arba kardiologas jums rekomendavo parengtinį gydymą antibiotikais prieš dantų priežiūros procedūras, prieš naudodami irigatorių, Sonic dantų šepetėlį ar bet kokią kitą burnos higienos priemonę, turėtumėte pasikonsultuoti su savo odontologu ir/arba sveikatos priežiūros specialistu.
- Šis gaminys atitinka elektromagnetiniams prietaisams taikomus saugos standartus. Jei turite širdies stimuliatorių ar kitą implantuotą prietaisą, turintį magnetų arba elektroninių detalių, prieš naudodami Sonic dantų šepetėlį susisiekite su savo gydytoju arba prietaiso gamintoju.
- Būtina griežta priežiūra, jeigu prietaisu naudojasi vaikai ar neįgalieji.
- Nenaudokite gaminio ilgiau nei 5 minutes dviejų valandų laikotarpyje.
- Būtina prižiūrėti ir užtikrinti, kad vaikai nežaistų su prietaisu.
- Šis gaminys turi poliarizuotą kištuką (viena geležtė yra platesnė už kitą). Siekiant sumažinti elektros smūgio riziką, šis kištukas į elektros lizdą telpa tik kišamas viena puse. Jei kištukas netelpa į elektros lizdą, apverskite jį ir pabandykite dar kartą. Jei jis vis tiek netelpa, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką, kuris kištuką pakeis. Nebandykite patys keisti ar taisyti laido ir jo kištuko.
- Šis gaminys neturi jokių detalių, esančių dantų šepetėlyje arba irigatoriuje, kurias galėtų pakeisti pats vartotojas. Nebandykite atidarinėti nė vieno iš šių komponentų, išskyrus tuos atvejus, kai keičiate baterijas. Žiūrėkite 11 puslapį, "Baterijų išėmimas."
- Dantų pastos, savo sudėtyje turinčios sodos arba peroksido, abrazyvinių arba cheminių valiklių, naudojimas, gali pažeisti plastikinį šio produkto korpusą.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.

PAAMINIO APRAŠYMAS

Antgalis

Rezervuaro dangtis


Vandens Ijungimo/ Išjungimo mygtukas

Burnos irigatoriaus rankena





Ijungimo/ Išjungimo mygtukas

Burnos irigatoriaus Stiprumo reguliavimas

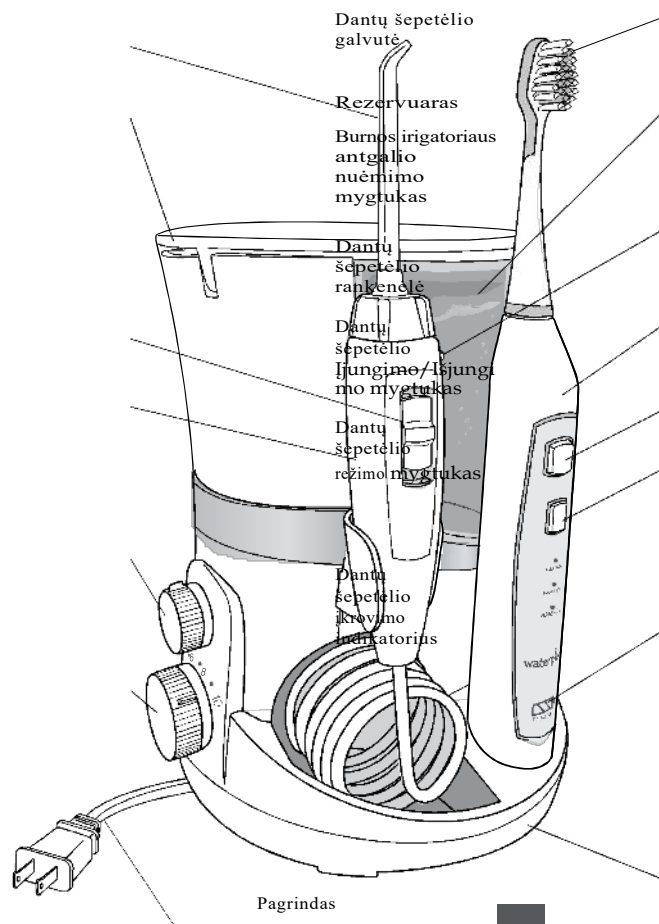Maitinimo laidas

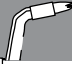

DĖTI NAUDOJANTIS BURNOS IRIGATORIUMI

Keisti kas 6 mėnesius			
Ortodontinis antgališ	LABIAUSIAI TINKA	Klasikinis purkštuko antgališ	LABIAUSIAI TINKA
		dojimui  <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Bendram dojimui  <input checked="" type="checkbox"/>
Pik Pocket™ antgališ	LABIAUSIAI TINKA	Liežuvio valiklis	LABIAUSIAI TINKA
		Senėms  <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Gaivinti kvapui  <input checked="" type="checkbox"/>
Plaque Seeker® antgališ	LABIAUSIAI TINKA	PASTABA: Nevisi antgališai ir šepetėlio galvutės yra įtrauktos į modelių komplektą. Keitimui reikalingus antgalius/prietaisus galima įsigyti tiesiogiai iš www.waterpik.lt arba telefonu +37062026601. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie antgalius, kitus priedus ir gaminio naudojimą, apsilankykite mūsų tinklalapyje www.waterpik.lt .	
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Implantams ✓ Tiltams ✓ Karūnelėms ✓ Bendr. naudojimui ✓ Dantų pokštelėms 		
Triple Sonic dantų šepetėlio galvutė	LABIAUSIAI TINKA		
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Apnašų šalinimui 		

Gaminio įjungimas

Įjunkite laidą į elektros lizdą. Jei lizdas yra valdomas sieniniu jungikliu, įsitikinkite, kad jis yra įjungtas.

Rezervuaro paruošimas

Pakeikite rezervuaro dangtelį ir ištraukite rezervuarą. Pripilkite jį šilto vandens. Įstatykite rezervuarą atgal ant pagrindo, tvirtai jį paspauskite ir uždarykite dangtelį.


Antgalių uždėjimas ir nuėmimas

Uždėkite antgalį ant irigatoriaus rankenos centro, tvirtai paspauskite jį žemyn taip, kad antgalis įsistatytų į vietą. Jei antgalis yra tinkamai įstatytas spalvotas antgalio žiedas bus vienišas su rankena. Norėdami nuimti antgalį nuo rankenos, paspauskite antgalio nuėmimo mygtuką, esantį ant rankenos.



Negali likti tarpo

Nuimti

Pripilti

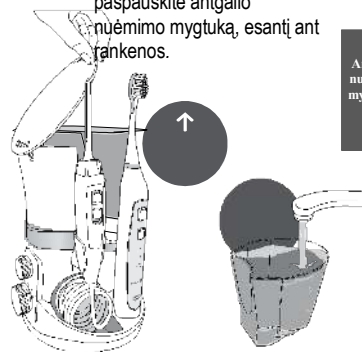


Antgalio nuėmimo mygtukas

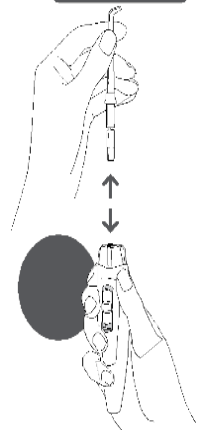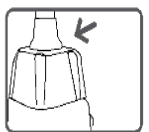

Prime Unit (tik naudojant pirmą kartą)

Slėgio kontroliavimo skalėje, esančioje ant prietaiso pagrindo, nustatykite aukštą slėgį (slėgio nustatymas Nr.10), nukreipkite rankeną ir antgalį į kriauklę. ĮJUNKITE galią bei vadenį, kad vanduo imtų bėgti iš antgalio. IŠJUNKITE prietaisą.

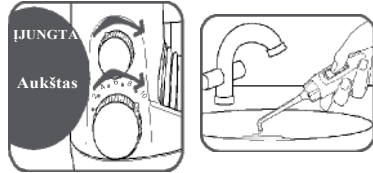


Slėgio nustatymas

Naudodamiesi gaminiu pirmą kartą, ant prietaiso pagrindo esančioje slėgio kontroliavimo skalėje nustatykite žemiausią galimą slėgį

(slėgio nustatymas Nr. 1).

Laikui bėgant, palaipsniui didinkite slėgį iki jums geriausiai tinkančio arba tiek, kiek nurodė jūsų dantų priežiūros specialistas.

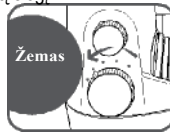

Irigatoriaus naudojimas

Prieš ĮJUNGdami vandens srovę, antgalį būkite pasiruošę prie tarpdančio.

Įjunkite prietaisą, ant rankenos esantis vandens jungtukas turi būti įjungtas.



Pasilenkite virš kriauklės ir šiek tiek praverkite lūpą leisdami vandeniui laisvai tekėti į kriauklę.



Baigę naudotis, IŠJUNKITE vandens mygtuką bei galią. Naudojimosi metu, vandens tėkmę galite sustabdyti, stumtelėdami vandens jungtuką, esantį ant prietaiso rankenos, į išjungimo poziciją.

PASTABA: Prietaiso variklis veiks toliau.

Rekomenduojama valymo technika

Siekdami geriausio rezultato, pradėkite nuo galinių dantų, o paskui pereikite prie priekinių.



Nukreipkite srovę į danteną 90 laipsnių kampu. Švelniai


slinkite antgalį palei dantenų liniją trumpam sustodami ties tarpdančiais. Tęskite tol, kol išvalysite tiek vidines, tiek išorines apatinių ir viršutinių dantų puses. Pasilenkite virš kriauklės.



Pabaigus naudoti

Išjunkite prietaisą. Išpilkite rezervuare likusį skystį

PASTABA: Jeigu naudojote ne vandenį, o burnos skalavimo arba kitą skystį, žiūrėkite skiltį „Burnos skalavimo ir kitų skysčių naudojimas“.

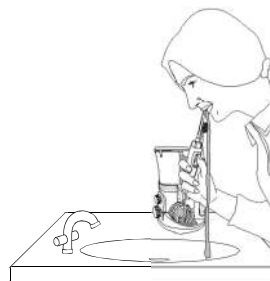

ANTGALIO NAUDOJIMAS

Pik Pocket™ antgalis

Pik Pocket™ antgalis yra specialiai skirtas vandens ar antibakterinių tirpalų puškimui giliai į dantenu kišenes. Norėdami naudoti Pik Pocket® antgalį, **nustatykite žemiausią slėgį.**




Dėkite minkštą antgalį prie danties 45 laipsnių kampu ir švelniai kiškite antgalį po dantenu linija į kišenę.

Liežuvio valymo antgalis

Norėdami naudoti liežuvio valiklio antgalį, nustatykite žemiausią slėgį, laikykite antgalį liežuvio centre / viduryje, arčiau gerklės, ir įjunkite irigatorių. Stumkite pirmyn lengvai paspausdami. Didinkite spaudimą pagal savo poreikius.

**Ortodontinis antgalis**

Norėdami naudoti ortodontinį antgalį, švelniai slinkite antgalį palei dantenu liniją trumpam sustodami, kad švelniai pavalytumėte vietą tarp dantų ir breketų prieš pereidami prie kito danties.

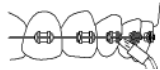**Plaque Seeker® antgalis**

Norėdami naudoti Plaque Seeker® antgalį, laikykite jį netoli danties taip, kad šereliai švelniai liestų dantį. Švelniai slinkite antgalį palei dantenu liniją trumpam sustodami tarp dantų, kad švelniai išvalytumėte ir leistumėte vandeniui tekėti tarp dantų.

**Burnos skalavimo ir kitų skysčių naudojimas**

Savo Waterpik® irigatorių galite naudoti burnos skalavimo ir kitų antibakterinių tirpalų purškimui. Panaudoję specialųjį skystį, išplaukite prietaisą, kad užkirstumėte kelią užsikimšimui, dalinai pripildydami rezervuarą šiltu vandeniu ir paleisdami įrenginį, kai šio antgalis nukreiptas į kriauklę, kol rezervuaras ištuštės.

**Valymas**

Prieš valydami, ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Kai reikia, gaminį valykite naudodami minkštą audinį ir švelnų valiklį. Vandens rezervuaras lengvai nuimamas, kad būtų galima lengvai išvalyti, taip pat saugu jį plauti viršutiniame indaplovės stalčiuje.

Kalkių nuosėdų šalinimas

Priklausomai nuo mineralų kiekio, esančio jūsų naudojamame vandenyje, prietaise gali susidaryti kalkių nuosėdų. Jeigu gaminio neprižiūrėsite, jos gali trikdyti prietaiso darbą. Vidinių dalių valymas: į pilną rezervuarą šilto vandens įpilkite 2 valgomuosius šaukštus maistinio acto. Nukreipkite rankeną ir antgalį į kriauklę. ĮJUNKITE įrenginį ir palikite jį veikti tol, kol rezervuaras ištuštės. Išskalaukite pakartodami procedūrą, tik šį kartą rezervuarą pripildykite švariu šiltu vandeniu. Siekiant užtikrinti optimalų prietaiso veikimą, šią procedūrą atlikite kas 1 – 3 mėnesius.

Pratekėjimas

Jei prietaisas varva dėl pažeistos žarnelės, atsargines žarneles ir rankenas galite įsigyti adresu www.waterpik.lt arba susisiekti Waterpik atstovu telefonu +37062026601

Aptarnavimas

Waterpik® irigatoriui netaikomos techninio aptarnavimo paslaugos ir prietaisams nereikalingas reguliarus aptarnavimas. Visas dalis ir priedus rasite adresu www.waterpik.lt.

Taip pat galite paskambinti mūsų telefonu +37062026601. Visuose susirašinėjimuose nurodykite serijos ir modelio numerius. Šie numeriai yra nurodyti įrenginio apačioje. Vis dar turite klausimų?

Apsilankykite tinklalapyje www.waterpik.lt.

Water Pik, Inc. garantuoja naujiems šio gaminio naudotojams, kad medžiagos yra be defektų ir atsako už gaminio kokybę 2 metus nuo įsigijimo datos. Bus prašoma, kad pirkėjas pateiktų anspauduotą instrukcijos knygelę kaip įsigijimo datos įrodymą ir, jei reikės, visą gaminį, kad įrodytų garantinio aptarnavimo poreikį. Water Pik, Inc. savo nuožiūra pakeis bet kurią gaminio detalę, kuri, jos nuomone, yra sugedusi, su sąlyga, kad gaminiu nebuvo piktnaudžiaujama, kad jis nebuvo netinkamai naudojamas, keičiamas ar sugadintas po įsigijimo, nebuvo naudojamas ne pagal instrukcijas ir, kad buvo naudojamas tik su Water Pik, Inc. patvirtintais priedais ir naudojamomis detalėmis. Pirkėjas atsakingas už prietaiso diegimą ir šiam procesui garantija neteikiama. Ši ribota garantija neapima priedų ar naudojamų dalių, tokių kaip antgaliai ir šepetėlių galvutės. **Prietaiso jungimas į netinkamą įtampą pažeis gaminį, o garantija tokiu atveju NEGALIOS.**

Ši garantija suteikia jums konkrečias juridines teises. Galite turėti ir kitų teisių, kurios skiriasi, priklausomai nuo jūsų gyvenamojoje vietoje galiojančių įstatymų

Triple Sonic dantų šepetėlio įkrovimas

Prieš naudodami pirmą kartą, prietaisą kraukite 24 valandas. Kai prietaisas bus visiškai įkrautas, 3 įkrovimo indikatorius lemputės nepertraukiamai degs. Visiško įkrovimo užteks maždaug 20 nustatyto laiko dantų valymo ciklą, arba apytiksliai 10 dienų, valantis dantis du kartus per dieną.

Jei dantų šepetėlio nenaudosite ilgą laiką (tris mėnesius arba ilgiau), įsitikinkite, kad prietaisas būtų visiškai pakrautas prieš jo nenaudojimą.


Režimai

Clean: Standartinis režimas geresnės kokybės dantų valymui.

Whiten: Dantų valymas su poliravimu ir balinimu.

Massage: Pulsavimas švelniai dantenų stimuliacijai.

Įkrovimo indikatorius lemputės

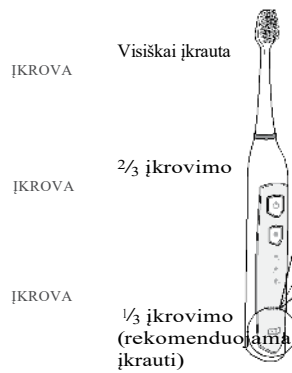

Jeigu apatinė LED lemputė pradeda greitai mirksėti, prietaisas neveiks.

Kad dantų šepetėlis vėl veiktų, turite maždaug 1 valandai jį pastatyti ant įkroviklio.

ĮKROVA



- Pasirinkite režimą, spauskite režimo mygtuką, kol lemputė užsidegs ties norimu režimu, tada paspauskite Įjungti/Išjungti mygtuką.
- Prieš įjungdami prietaisą, dantų šepetėlio galvutę pridėkite prie dantų nuo kurių pradėsite valyti.
- Siekdami geriausių rezultatų, šepetėlį pridėkite prie dantenų linijos 45 laipsnių kampu.
- Silpnai spausdami šepetėlį braukite pirmyn atgal taip, kad uždengtumėte vieną arba du dantis vienu metu.
- **Ketvirčio laikmatis:** Jūsų Triple Sonic dantų šepetėlis padarys trumpą pauzę kas 30 sekundžių, taip jums primindamas, kad reikia pereiti prie kito ketvirčio jūsų burnoje.

2 minučių laikmatis: Šepetėlis automatiškai išsijungs po 2 veikimo minučių.

1. **Valymas Po kiekvieno naudojimo** prietaisą išjunkite, nuimkite šepetėlio galvutę nuo rankenos ir išskalaukite šepetėlio galvutę po tekančiu vandeniu.

2. Po kiekvieno naudojimo, rankeną sausai nušluostykite.

Aptarnavimas Waterpik® dantų šepetėliams reikiamos techninio aptarnavimo paslaugos ir prietaisams nereikalingas reguliarus aptarnavimas. Visas dalis ir priedus rasite adresu www.waterpik.lt. Taip pat galite paskambinti mūsų telefonu +37062026601

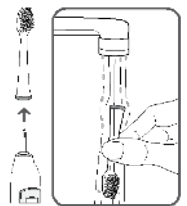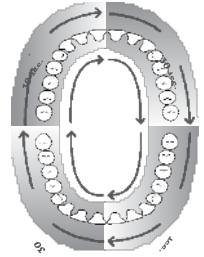

RIBOTA TRIPLE SONIC DANTŲ ŠEPETĖLIO DVEJŲ METŲ GARANTIJA

Visuose susirašinėjimuose nurodykite serijos ir modelio numerius. Šie numeriai yra nurodyti įrenginio apačioje.


Šalinimas

Šiame prietaise yra įkraunamų nikelio-metalo hidrido baterijų. Baterijos yra nekeičiamos. Prašome neišmesti prietaiso kartu su buitinėmis atliekomis. Baterijas išimkite vadovaudamiesi žemiau pateiktomis instrukcijomis ir rūšiukite pagal vietos atliekų perdirbimo centro nurodymus.


Baterijų išėmimas

Pastaba: Šis procesas nėra grįžtamasis. Tik tuomet, kai prietaisas neveiks, išimkite baterijas perdirbimui. Jeigu baterijas išimsite anksčiau, prietaisas bus sugadintas. Baterijos įkrovą išeiškite tiek, kad prietaisas neveiktų. Atsižvelkite į pagrindines atsargumo priemones. Baterijas išimkite taip, kaip parodyta ir rūšiukite jas bei likusį gaminį, atsižvelgdami į vietines nuostatas.


1. Naudodamiesi atsuktuvu išsukite varžtą ir išimkite baterijų lizdo dureles.

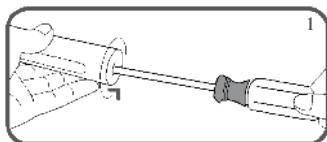

2. Laikykite rankeną apverstą, paspauskite dantų šepetėlio veleną ir naudodami plokščią atsuktuvą atleiskite du laikilius esančius rankenoje, kad galėtumėte išimti vidines rankenos dalis.

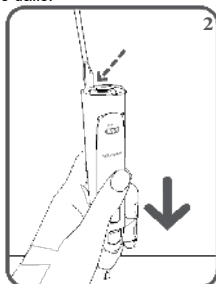

3. Atsuktuvą įkiškite šalia baterijos sujungimų ir pasukite taip, kad sujungimai sulūžtų. Išimkite maitinimo plokštę ir išlupkite bateriją iš gnybtų.

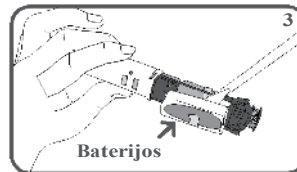

4. Deramai rūšiukite ir išmeskite baterijas.



Water Pik, Inc. garantuoja naujiems šio gaminio naudotojams, kad medžiagos yra be defektų ir atsako už gaminio kokybę 2 metus nuo įsigijimo datos. Bus prašoma, kad pirkėjas pateiktų anspauduotą instrukcijos knygelę kaip įsigijimo datos įrodymą ir, jei reikės, visą gaminį, kad įrodytų garantinio aptarnavimo poreikį. Water Pik, Inc. savo nuožiūra, pakeis bet kurią gaminio detalę, kuri, jos nuomone, yra sugedusi, su sąlyga, kad gaminiu nebuvo piktnaudžiaujama, kad jis nebuvo netinkamai naudojamas, keičiamas ar sugadintas po įsigijimo, nebuvo naudojamas ne pagal instrukcijas ir, kad buvo naudojamas tik su Water Pik, Inc. patvirtintais priedais ir naudojamomis detalėmis. Pirkėjas atsakingas už prietaiso diegimą ir šiam procesui garantija neteikiama. Ši ribota garantija neapima priedų ar naudojamų dalių, tokių kaip dantų šepetėlio galvutės. Ši garantija suteikia jums konkrečias juridines teises. Galite turėti ir kitų teisių, kurios skiriasi, priklausomai nuo jūsų gyvenamojoje vietoje galiojančių įstatymų.